


# Softform<sup>®</sup> Premier MaxiGlide

Reductie van schuif- en wrijfkrachten

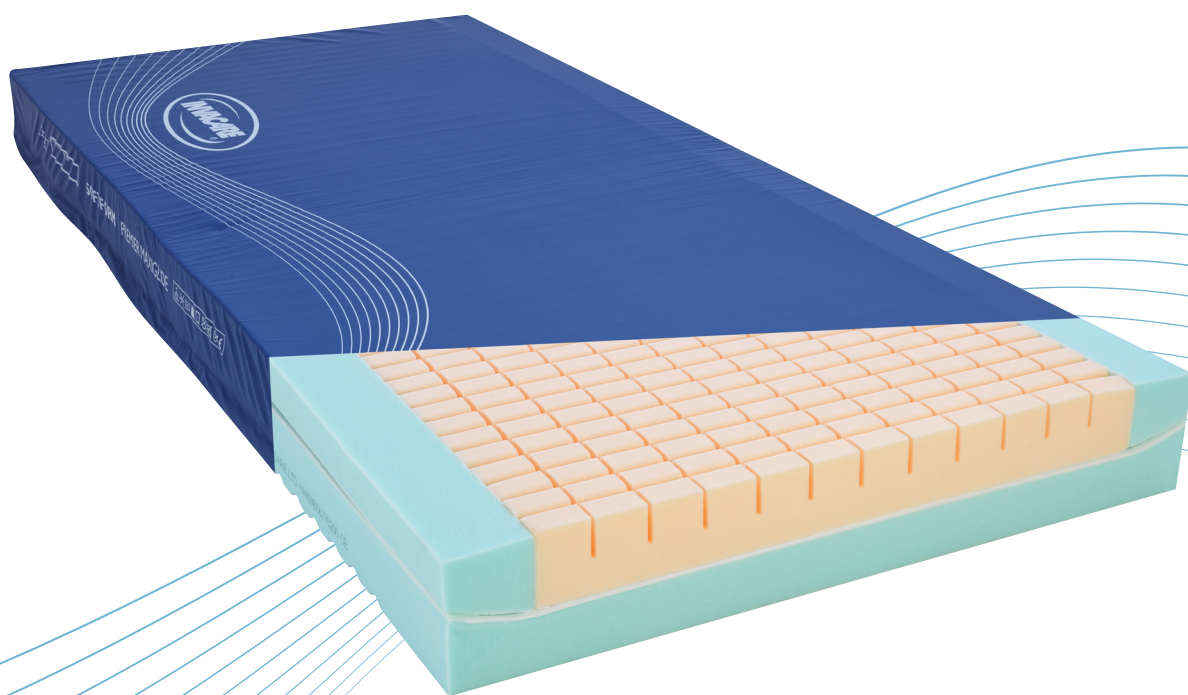

Yes, you can.<sup>®</sup>

## Effectieve decubitus preventie

De Softform Premier MaxiGlide van Invacare is een hoogwaardig foammatras en voorzien van een nieuw en innovatief Glide mechanisme voor een uitzonderlijke reductie van schuif- en wrijfkrachten bij gebruik van een elektrisch verstelbaar bed.

Door het gepatenteerde ontwerp van de matras is het mogelijk dat de matras zich tegelijkertijd kan aanpassen aan zowel de cliënt als het bed.


De bovenlaag met een uitstekende drukverdeling en een hoge mate van comfort en ondersteuning beweegt zich op unieke wijze ten opzichte van de onderlaag van de matras die zich aanpast aan de verstellingen van het bed.

De Softform Premier MaxiGlide is geschikt voor cliënten met een zeer hoog risico op het ontwikkelen van decubitus.


De Softform Premier MaxiGlide beschikt over een geprofileerde bovenlaag met speciaal uitgesneden schuimcellen, die onafhankelijk bewegen en zorgen voor een maximaal contactoppervlak en optimale drukverdeling.



> **Soepele glij**  
laag

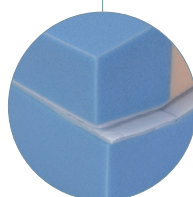

> **Bovenlaag blijft**  
onder cliënt

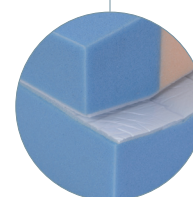

> **Onderlaag volgt**  
het ligvlak van het bed


1



## Reduceert fysieke belasting


Het **matras ondersteund** de voordelen van een elektrisch verstelbaar bed, waardoor de cliënt beter in bed ligt. Hierdoor vermindert de noodzaak tot frequente herpositionering van de cliënt.

2

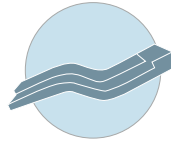

## Multi stretch hoës

De **multi-stretch** matrashoes, past zich aan de profileringen van de toplaag aan en minimaliseert het risico op plooivorming waardoor weefsel schade wordt voorkomen.

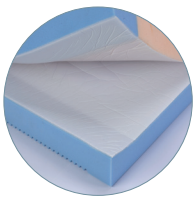


### > Modulaire constructie

Ondersteund een eenvoudige vervanging van alle onderdelen waardoor de levensduur wordt verlengd.

### > Gepatenteerd ontwerp

Het "Glide" mechanisme is alleen verkrijgbaar bij Invacare en erkende dealers.

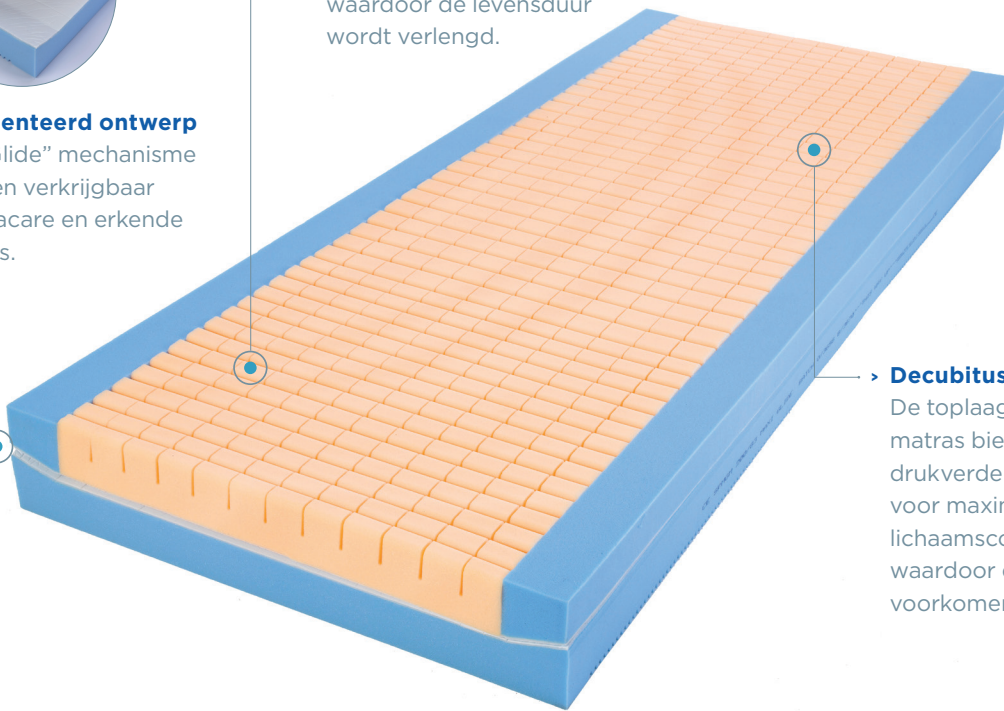


### > Decubituspreventie

De toplaag van het matras biedt uitstekende drukverdeling, ontworpen voor maximaal lichaamscontact waardoor decubitus wordt voorkomen\*.



### > Hoës is bestand tegen binnendringen vocht

Deze is multi-stretch, dampdoorlatend en waterdicht polyurethaan, met hoogfrequent gelaste naden en een flap over de volledige lengte van de rits.

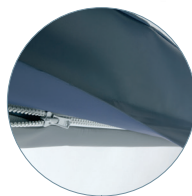

### > Volledig afneembare top hoës en robuuste onderkant

De geharde PU gecoate basis beschermt het matras tegen metalen bedframes. De tophoes is gemakkelijk te verwijderen voor het wassen en inspectie van het schuim.



### > Oriëntatie symbool

Dit symbool waarborgt dat het matras op juiste wijze in bed wordt gelegd.



## Optioneel SRT (Strikethrough Resistant Technology)

Optionele SRT (Strikethrough Resistant Technology) hoes is gemaakt van een zeer resistente polymeer waardoor het veel bestendiger is tegen slijtage en schade. De levensduur van de hoes is daarmee aanzienlijk vergroot.

### Technische gegevens ▼

Kijk voor meer informatie over dit product, zoals de gebruiksaanwijzing op, [www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Breedte ▼	Hoogte ▼	Lengte ▼	Gewicht ▼	Gebruikersgewicht ▼	Reinigings-temperatuur ▼	Kleur
800, 855, 880, 900 mm	152 mm	1950-2100 mm	13,5 kg	247.6 kg	95 °C	

Manufactured to European Standards:  
Interior Foam: BS 5852 Crib 5  
Cover: BS 7175 Crib 5

1. Essentiële verpleegkundige zorg is cruciaal bij decubitus preventie. Dit matras zal een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van een decubitus preventief zorgplan. Onderwijs, klinische beoordeling en actie gerichte planning op basis van risicofactoren zijn cruciaal bij het voorkomen van decubitus. Diverse risicoschalen kunnen worden gebruikt als onderdeel van een risico inventarisatie voor decubitus en moet worden gebruikt in combinatie met een klinische beoordeling. Aan een klinische beoordeling wordt meer klinische waarde toevertrouwd.

**Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57**  
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58  
[nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3  
6716 AE Ede  
Nederland



**Yes, you can.**

