

VICAIR


Vicair[®] Liberty



Komfort og trykaflastning



Vicair Liberty puderne er velegnet til kørestolsbrugere med lav risiko for at udvikle tryksår. **Vicair Liberty** kan anvendes til forskellige formål, hvor perfekt form og let trykfordeling ønskes. **Vicair Liberty** puderne er behagelige at anvende, er ca. 40 mm høj og vejer kun 300-400 gram. **Vicair Liberty** er let at flytte fra stol til sæde, og kan tages med i byen ved behov for aflastende og komfortabel siddeflade.

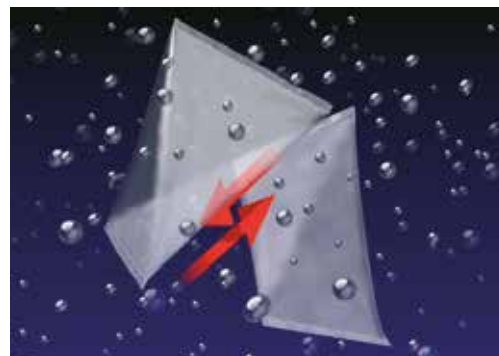

Vicair teknologi

Invacare **Vicair Liberty** puderne benytter sig af Invacare **Vicair Technology™**. En unik og innovativ metode til støtte af kroppen. Hundredevis af små luftfyldte celler kaldet **SmartCells™**, er lagt i et tyndt lag silikone i et vinylbetræk. Dette gør, at luftcellerne let glider mod hinanden og derved former sig efter kroppens konturer.

Perfekt form og trykfordeling

Vicair Liberty puden indeholder udover silikone og **SmartCells** også luft, der presses ud gennem en ventil, hvorved puden former sig helt efter brugerens konturer. **Vicair Liberty** puden anvendes til brugere, der har behov for komfort og ved forebyggelse af tryksår hos brugere i lavrisiko for at udvikle tryksår.

Egenskaber og tilbehør



Vicair Liberty PT

2 kammer pude, der forhindrer tendens til fremadskridning. Det forreste kammer fungerer som en kile, der reducerer shearkræfterne.



Klar til brug

Vicair Liberty er altid klar til brug uden yderligere tilpasning. Ved hjælp af en ventil, vil overskydende luft automatisk forsvinde, når man sætter sig. Og **SmartCells** og dermed puden tilpasser sig og understøtter brugerens form.







Komfortabelt betræk


Vælg **Vicair Liberty** med et tyndt og strækbart sort betræk, der let kan afmonteres for vask. Samtidig udnyttes **Vicair Liberty**'s evne til trykaflastning og komfort

Tekniske data

For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

	Max. brugervægt	Rengøring af betræk:
 Vicair Liberty 400x400, 400x450, 430x430, 450x400, 450x450, 450x500, 500x450, 500x500 mm	 0,3 - 0,4 kg	 150 kg
		 60°

Farve

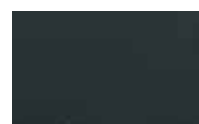

Sort

Til Vicair Liberty PT findes et betræk, der kan vaskes ved 60°. Selve Vicair Liberty PT kan afvaskes med mild sæbevand eller med et desinficerende middel. Se vaskevejledning i brugsanvisningen.

Tlf.: 3690 0000
 Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
 Denmark

