

Vendlet Standard

Motorisert vendehjelpemiddel



Trygg reposisjonering

Skånsom vending og reposisjonering i seng



Vending gjort enkelt

Det motoriserte vendehjelpemiddelet som tar de tunge løftene for deg

VENDLET Standard er et sengemontert, motorisert vendehjelpemiddel for reposisjonering og forflytning av brukere i seng. Det kan benyttes til vending fra ryggleie til sideleie og tilbake igjen, flytting høyere opp eller sideveis i sengen, mobilisering til og fra sengekanten, samt støtte ved mageleie og påsetting av løfteseil.

Systemet reduserer eller eliminerer behovet for skyving og trekking som ofte er årsaken til belastningsskader hos omsorgspersonell. Dette bidrar til redusert fysisk belastning og kan bidra til lavere sykefravær.

De fleste brukere som trenger hjelp til reposisjonering, opplever bevegelsene som rolige og behagelige. Lakenet omslutter brukeren skånsomt mens omsorgspersonen enkelt veileder armer og ben til ønsket posisjon. Den jevne og kontrollerte bevegelsen reduserer skjærkrefter og friksjon, noe som gjør systemet spesielt godt egnet for personer med risiko for trykksår eller som lett blir urolige.



1

Skånsom reposisjonering

Den jevne og flytende bevegelsen reduserer shear -krefter og friksjon, samtidig som den virker beroligende for engstelige eller urolige brukere. Hastigheten kan justeres slik at stengene beveger seg med 75 % eller 50 % av normal hastighet, noe som bidrar til økt komfort og trygghet for både bruker og omsorgsperson.

2

Hygienisk og enkel å montere

De elektriske komponentene er forseglet inne i hjørnestolpene, slik at systemet kan maskinvaskes mens det fortsatt er montert på sengen. Systemet monteres uten aktuatorer under sengen, noe som gjør det kompatibelt med et bredere utvalg av sengemodeller og sengerammer.



> Nødutløser

på alle fire hjørnestolpene for hurtig manuell senking

> Løftefunksjonsknapp

på hjørnestolpen for enkel høydejustering

> Ergonomisk håndkontroll

for vending og reposisjonering

> Quick-Tag-feste for laken

som enkelt presses inn i et spor på stangen. Slitesterkt, hygienisk og utviklet for lang levetid.

> Integrert sengegrind

De hevede stengene fungerer som en sengegrind, mens de i senket posisjon ligger 2,5 cm under madrassen for enkel og trygg inn- og utstigning av sengen.

> Teleskopiske sider

Lengden kan enkelt justeres for å passe ulike sengetyper og sengestørrelser.




Tekniske data ▼



Sikker arbeidsbelastning ▼

250 kg*

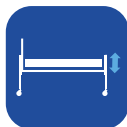

Høydejustering ▼

Opptil 120 mm



Lengde ▼

Teleskopiske
sidebøyler for ulike
sengemodeller



Rengjøring ▼

Maskinvaskbar
mens den er
montert

*VENDLET Standard skal alltid vurderes i forhold til sengens maksimale brukervekt.
Se bruksanvisningen.

Artikkel nr ▼ Beskrivelse ▼

VENDLET Standard

6300000	VENDLET Standard inkl. 1 treklaken 270 cm med Quick Tag og 1 glidelaken 95 cm.
---------	--

VENDLET Standard -Treklaken

2600200	Treklaken Vendlet 270cm med Quick Tag
2600204	Treklaken Vendlet 320 cm med Quick Tag
2600206	Treklaken Vendlet 370 cm med Quick Tag

Tilbehør til VENDLET

Glidelaken - passer til alle modeller VENDLET

3601001	Glidelaken 95 cm. Passer til madrastørrelse 80 - 90 cm x 205
3601002	Glidelaken 135 cm. Passer til madrastørrelse 110 - 130 cm x 205
3601003	Glidelaken 115 cm. Passer til madrastørrelse 95 x 110 cm x 205 cm
3601009	Glidelaken 115 cm langt. Passer til madrastørrelse 95 x 110 cm x 220 cm
3601008	Glidelaken 95 cm, Langt. Passer til madrastørrelse 80 - 90 cm x 220 cm

Puder

5000002	Kilepute (H15, B 30 cm, L 50 cm)
5000021	Posisjoneringspute Pad High (H 15 cm, B 30 cm, L 50 cm)

Montering

6100300	Transportvogn Vendlet
	Montering på pleieseng

DHCare Norge AS
Brynsveien 16, PB. 6230 Etterstad
0603 Oslo
www.dhcare.no



Invacare International GmbH is a member of the DHCare group of companies. Invacare International GmbH reserves the right to modify existing product models at any time. Product specifications may vary across regions. ©2026 Invacare International GmbH. All rights reserved. Vendlet_NO_02092026