



**NIEUW**

Invacare® | **Action<sup>®</sup> 3 NG**

Nog lichter, compacter en multiverstelbaar !



De **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** is één van de mooiste voorbeelden uit het Invacare gamma wat betreft compatibiliteit.

Dankzij het gemeenschappelijke platform met andere producten uit het **Action** gamma kan de stoel gemakkelijk opnieuw aangepast worden aan de noden van de gebruiker.

- Lichtste rolstoel uit zijn categorie
- Verhoogde stabiliteit voor een vlottere rit
- Verbeterde design voor betere positionering



### Licht en transporteerbaar

De nieuwe **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** is al de lichtste manuele rolstoel uit zijn categorie en kan nog verlicht worden dankzij de optionele lichte zwenkwielen. De zwenkwielen verlagen het totale gewicht met 1,2 kg. Bovendien kan de rolstoel uitgerust worden met een opklapbare en hoekverstelbare rugleuning. Dit maakt de stoel eenvoudig verplaatsbaar, zelfs in de kleinste auto's.

### Comfort en functionaliteit

De **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** is uitgerust met een kruisbevestiging, waardoor zowel de stabiliteit als de stevigheid van de rolstoel verbeterd zijn, evenals de functie voor het op- en ontplooiën. Samen met het nieuw hefboomsysteem - om de armsteunen eenvoudiger op te klappen - maakt de **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** de ideale keuze voor maximaal comfort.

### Instelbaar en modulair

Doordat hij instelbaar en modulair is, speelt de **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** uitstekend in op de veranderende behoeftes van de gebruiker. Hergebruiken kan door het eenvoudig aanpassen van de opties.

### Ontworpen om zich aan te passen

De nieuwe kleurentrends en rugbekleding bieden nog meer mogelijkheden om de stoel op maat te maken. De nieuwe zwarte achterhoes kan zich perfect rond de rugbuizen aanpassen voor extra comfort. Bovendien zorgt de afneembare lumbale spanband voor betere ondersteuning ongeacht de morfologie.





### Lichtheid

Met een standaardgewicht van 14,2 kg en een transportgewicht van 7,5 kg (zonder de beensteunen, armsteunen en achterwielen), voldoet de **Action<sup>5</sup><sub>NG</sub>** aan transport-, opslag- en gemakseisen. Dankzij de nieuwe lichtgewicht opties, kan de stoel nog verder verlicht worden tot 13 kg.



### Remhendel

Wegneembare handrem om transfers te vergemakkelijken.



### Lengtecompenserende en verhoogde beensteun

Hoekverstelbaar: 0° tot 80°. Automatische vergrendeling op de gewenste hoek. Kuitsteunen regelbaar in diepte en hoogte.



### Kledingbeschermer

De uitsparing in de kledingbeschermer vergemakkelijkt transfers.



### Opklapbare armsteun

Het nieuw hefboomsysteem op de verstelbare armleuningen zorgt voor een snelle ontgrendeling, zelfs bij beperkte handfuncties.



### Hoekverstelbare rugleuning

De gepatenteerde, traploze en hoekverstelbare rugleuning uit de **Action<sup>5</sup>** maakt het mogelijk om instellingen uit te voeren terwijl de gebruiker in de rolstoel zit. Ook de rugleuning is neerklapbaar waardoor de rolstoel zeer compact wordt.



### Geamputeerde ondersteuning

Hoek-, hoogte- en diepteverstelbaar, de geamputeerde ondersteuning is ook wegzwenkbaar.



### 20 achterwielposities

De rijprestatie wordt verbeterd dankzij de keuze uit 20 achterwielposities als norm.



### Instelbare rugleuning d.m.v. gasveer

Een gasveersteun zorgt ervoor dat de verzorgers de rugpositie van de gebruiker eenvoudig in één beweging kunnen aanpassen.



### Zwarte achterhoes uit twee materialen

De nieuwe zwarte achterhoes uit Mesh werd extra groot ontworpen om de rugbuizen te bedekken en zorgt bovendien voor een eenvoudige herpositionering van de lumbale spanband.



### Invacare **Action³<sub>NG</sub>** Transit versie

De Transit versie biedt zithoogtes van 460, 485 en 510 mm met 12" achterwielen.



### Buisvormige armlenning

De nieuwe, slanke buisarmleuningen geven de **Action³<sub>NG</sub>** een actievere look.



### Hefboomsysteem

Met dit controlesysteem kunnen gebruikers met een lage spiertoon de **Action³<sub>NG</sub>** gemakkelijker aandrijven aan de hand van een hefboom.



### Bevestigingsoog

Zorgt voor een eenvoudige en veilige bevestiging bij transportmiddelen.



### Voorwielen

De voorwielen zijn verkrijgbaar in 5", 6" en 8" lucht -of rubberband, met keuze uit diverse bandbreedtes.



### Hoofdsteenen

Een neksteun, hoofdsteen of wangsteun zijn verkrijgbaar volgens de wensen van de gebruiker. Deze kunnen worden ingesteld op de rugleuning, waarbij de hoogte of diepte aangepast wordt om de meest optimale positie te garanderen.





### Invacare **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Dual HR™**

Specifiek voor hemiplegisch gebruik, de hoepels met QR-mechanisme maakt de stoel gemakkelijk vouwbaar.



### Armleuningen

① Opklapbaar en afneembaar, ② Opklapbaar, afneembaar en hoogteverstelbaar, ③, ④ en ⑤ Afneembaar en hoogteverstelbaar, ⑥ Comfort afneembaar en hoogteverstelbaar en ⑦ Hemiplegische leuning.



### Anti-tipper

Biedt extra veiligheid en wordt ofwel vast (bovenaan) gemonteerd ofwel afneembaar (onderaan).



### Transparante tafel

Handig tijdens de maaltijden en vrijetijdsactiviteiten, zoals lezen.

### Rugleuningstypes

Naast de vaste rugleuning (0° of 7°), biedt de **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** 4 verschillende rugleuningstypes volgens de behoeften van de gebruiker:

① Halverwege opvouwbaar rugleuning, ② Vouw- en verstelbare hoek (-15°/+15°), ③ Instelbare rugleuning en ④ Instelbare rugleuning d.m.v. een gasveer (0°/30°)



### Zitkussens



### Zitkussens

Invacare biedt een breed scala aan zitkussens die voldoen aan de behoeften van elke gebruiker. Het assortiment reikt uit van basiscomfortkussens tot kussens met HR schuim om het risico op spoorvorming te voorkomen. Ontdek het assortiment positioneringskussens en rugsystemen op onze website.



### Matrx® rugleuning

De optionele **Matrx Elite** en **Elite Deep** rugleuning bieden extra comfort.



### Gespiem

Deze optionele **BodyPoint** riem garandeert de gebruiker meer veiligheid en verhoogt zowel comfort, als posturale ondersteuning.

## Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website.

|                              | Zitbreedte                           | Zitdiepte          | Zithelling   | Zithoogte                                  | Rughelling                        | Rughoogte    | Voorste framehoek   |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Action 3NG zelfrijder</b> | 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm | 400 / 450 / 500 mm | 0° / 3° / 6° | 360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm | 0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15° | 325 - 510 mm | 80° / 0 - 80° / 90° |
| <b>Action 3NG Transit</b>    | 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm | 400 / 450 mm       | 0° / 3° / 6° | 460 / 485 / 510 mm                         | 0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15° | 380 - 460 mm | 80° / 0 - 80° / 90° |

|                              | Onderbeenlengte                      | Hoogte armsteun                            | Totale breedte      | Totale breedte (dichtgevouwen) | Totale lengte incl. voetsteunen | Totale lengte zonder voetsteunen | Totale hoogte |
|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Action 3NG zelfrijder</b> | 200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm | 200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm | Zitbreedte + 190 mm | 295 mm                         | 980 - 1105 mm                   | 835 - 960 mm                     | 820 - 1050 mm |
| <b>Action 3NG Transit</b>    | 200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm | 200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm | Zitbreedte + 160 mm | 260 mm                         | 950 - 1050 mm                   | 710 - 910 mm                     | 920 - 1050 mm |

|                              | Max. veiligheidshelling | Draaicirkel | Max. gebruikersgewicht | Totaalgewicht | Transportgewicht |
|------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>Action 3NG zelfrijder</b> | 9°                      | 870 mm      | 125 kg                 | 13,0 kg       | 7,1 kg           |
| <b>Action 3NG Transit</b>    | 9°                      | 870 mm      | 125 kg                 | 13,5 kg       | 10,3 kg          |



### Framekleuren

Hypnotic Purple



Matt Black




Blue Pop



Matt Red




Black Nylon

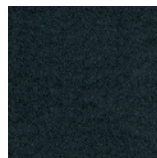

Pearl White



Slate Grey



Electric Green



Anthracite Black



### Bekleding

Kleuren kunnen enigszins afwijken van de hier afgebeelde voorbeelden.

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
 Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58  
 nederland@invacare.com  
 www.invacare.nl

Invacare B.V.  
 Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede  
 Nederland

Trusted Solutions,  
 Passionate People

