



Yes, you can.®

> Invacare® **Action⁴ Heavy Duty** **NIEUW**

Wendbaar en comfortabel

De Invacare® **Action⁴ HD** is ideaal voor dagelijks gebruik voor gebruikers tot 150kg! Het frame is extra stabiel zodat er een zeer preciese besturing en goede wendbaarheid mogelijk is.

De **Action⁴ HD** is ontwikkeld voor langdurig gebruik. De onderdelen van de **Action⁴ HD** zijn uitwisselbaar met de Invacare® **Action³** en vele van de nieuwe Invacare® producten.





➤ **Ontworpen voor optimale prestaties en wendbaarheid**

De *Invacare*® **Action⁴ HD** beschikt over een extra stabiel frame. Hierdoor rijdt de stoel erg licht en wordt er beter gebruik gemaakt van de energie van de gebruiker. Met zijn instelmogelijkheden is het makkelijk om de **Action⁴ HD** andere rij-eigenschappen te geven.

➤ **Veel gemeenschappelijke componenten**

Alle onderdelen gemonteerd aan het frame van de **Action⁴ HD** zijn uitwisselbaar met *Invacare*® **Action³** en met vele andere *Invacare*® rolstoelen.

➤ **Makkelijk mee te nemen door laag gewicht**

Eenmaal ingeklapt en wielen verwijderd kan de **Action⁴ HD** makkelijk op de voorstoel of in de achterbak van de auto. Het gewicht zonder achterwielen is slechts 8,5 kg. Hij is makkelijk in te klappen en mee te nemen.

➤ **De ideale keus**

De **Action⁴ HD** komt zelfs in de standaard uitvoering tegemoet aan de eisen van de individuele gebruiker. De rugbuizen, been- en armsteunen zijn in hoogte instelbaar. De *Invacare*® **Action⁴ Heavy Duty** biedt een grote mate van flexibiliteit.



Opties



Naspanbare rug

De naspanbare rug biedt een ergonomische ondersteuning en draagt bij aan een goede positionering van de gebruiker.



Rugfixatiestang

De rugfixatiestang geeft de rug meer stabiliteit. Deze optie is standaard bij de naspanbare rugbekleding.




Beensteunen

De beensteunen kunnen worden geleverd met een vaste hoek of hoekverstelbaar. Tevens zijn er amputatiesteunen leverbaar.



Armsteunen

Armsteunen zijn afneembaar.

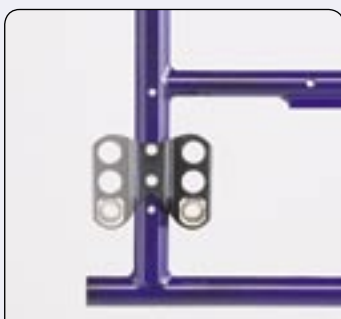

Optionele achterwiel posities


De achterwielen kunnen in hoogte vermeld worden voor verschillende zithoogtes. Het bevestigingsblok kan aan de voor- of achterkant van de framebuis geplaatst worden en ondersteboven.



Anti-tip

De anti-tip voorkomt dat de rolstoel achterover kantelt. De anti-tip is in hoogte verstelbaar zodat deze voor verschillende zithoogtes gebruikt kan worden.

Technische gegevens

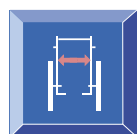


50,5, 55,5, 60,5 cm



40 - 45 - 50 cm



46, 48,5, 51 cm

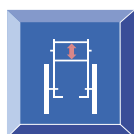

38 - 46 cm



20, 23, 26 cm




35 - 48 cm



0° - 6°



7°

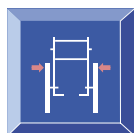


zitbreedte + 21 cm




90 - 103 cm



105 - 111 cm

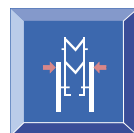

30,5 cm

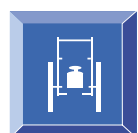

15,3 kg
(zitbreedte 44 cm)



150 kg



Transportgewicht
9 kg



Crash tested
ISO 7176-19**

* Verstelbare rug

** Onze rolstoelen voldoen aan bovenvermelde ISO-normen evenals aan ISO-norm 10542. Deze heeft het kenmerk voor extra veiligheid tijdens transport. Indien mogelijk wordt rolstoelgebruikers aangeraden gebruik te maken van de veiligheidsvoorziening in het voertuig.

Framekleur



Saffier blauw



Anthraciet zwart



Donker rood



Zilvergrijs



Esmerald groen

Bekleding



Zwart (Nylon)

Alle verstrekte informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare® behoudt zich het recht voor producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



INVACARE® B.V.
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede
Tel.: +31 (0) 318 - 69 57 57 · Fax: +31 (0)318 - 69 57 58
Email: csede@invacare.com · www.invacare.nl

