



Prestatie en kwaliteit

Het *Invacare Alegio* elektrisch hoog/laag bed is bestemd voor gebruikers die prestatie en betrouwbaarheid willen, maar wel van een betaalbare kwaliteit. Het uiterlijk van het bed is uiteraard van belang en daarom is het ook verkrijgbaar met een houten afwerking in beuken of kersen kleur.

Het lage totaalgewicht van 60 kg (basismodel) maakt het transport en de ingebruikstelling heel gemakkelijk. Het bed kan door één persoon gemonteerd en gedemonteerd worden. De hoogte van het bed is elektrisch instelbaar van 360 mm tot 800 mm en garandeert de zelfstandigheid van de gebruiker.





Comfort en functionaliteit

Invacare **Alegio** verenigt comfort en grote functionaliteit zowel voor de patiënt als voor het verzorgend personeel: dankzij een lage bed bodemstand van 360 mm is in- en uit bed stappen eenvoudig en worden transfers vergemakkelijkt.

De **Alegio** is verkrijgbaar met 3- of 4- delig inlegraam om aan individuele wensen tegemoet te komen. Bovendien kan de **Alegio** eenvoudig worden opgeslagen en verplaatst dankzij een transportset.

Onafhankelijkheid en ergonomie

De hoogste positie van het **Alegio** bed, namelijk 800 mm (ongeveer 970 mm met matras), laat het verzorgend personeel toe het bed naar hun wensen in te stellen, zodat ze in een comfortabele houding verzorging kunnen verstrekken.

Minimaal en gemakkelijk onderhoud

Alle kabels van de elektrische delen zijn afneembaar voor een gemakkelijk en zuinig onderhoud. Het schaarsysteem schuift door middel van een kunststof vierkant in een geleider dat geen onderhoud vereist.

De **Alegio** is getest en goedgekeurd bij zowel de Invacare test centra als bij de TÜV en is daarmee gegarandeerd veilig. Door de verschillende bedeinden past de **Alegio** in ieder interieur.

Eigenschappen en opties



Tendance_{NG} hoofd-/voetenborden

Hoofd-/voeteneinden zijn verkrijgbaar in kersen- met beukenhout. Passend bij de metalen onrusthekken.



Vibeke_{NG} hoofd-/voetenborden

Verkrijgbaar in kersenhout. Passend bij de metalen onrusthekken.

Eigenschappen en opties



Hoofd- en voeteneinde Kirsty en houten onrusthekken Nina (kersen, ook in beuken verkrijgbaar).



Verso onrusthek
Inklapbaar metalen onrusthek



Papegai en infuushouder
Papegai kan zowel in hoogte als in diepte vestelbaar.



Transportset
Een transportset voor eenvoudig transport en ruimtebesparende opslag.



Eenvoudig te monteren
Het bed kan eenvoudig worden gemonteerd en gedemonteerd door slechts één persoon.



Infrarood handbediening
Een infrarood bediening met ingebouwde ontvanger zorgt voor een draadloze bediening.



Centrale beremming
Verkrijgbaar met een wieldoorsnede van 100 mm of 125 mm.



Centrale beremming
Centrale beremming door middel van een bedieningsboog onder het voeteneind.



Handbediening
De bedden worden geleverd met een "Dewert"-handbediening met "groene knop"-functie. Ook verkrijgbaar in een versie waarbij elke functie individueel geblokkeerd kan worden.



Houder handbediening
Een flexibele houder voor de handbediening zorgt ervoor dat de handbediening eenvoudig bereikbaar is.

Technische gegevens


Alegio	Buitenmaat: 900* / 1010** mm Binnenmaat: 900 mm	Buitenmaat: 2100* / 2140** mm Binnenmaat: 2020 mm	3-delig inlegraam: 700 - 650 - 650 mm 4-delig inlegraam: 700 - 250 - 350 - 700 mm	Rughoek- verstelling van 0° tot 27°	Beenhoekverstelling van 0° tot 16°	Hoog - Laag: 360 - 800 mm Totale hoogte: 1590 - 2030 mm

Alegio	Bodemvrijheid: 135 mm	Belastbaar gewicht: 170 kg Max. gebruikersgewicht: 135 kg

* / Met hoofd- en voeteneinde Vibeke
** / Met hoofd- en voeteneinde Kirsty

NB/ Dit bed is niet geschikt voor gebruik door patiënten jonger dan 12 jaar, of door patiënten met een lichaamslengte korter dan een gemiddelde 12-jarige.

Framekleur en houtwerk

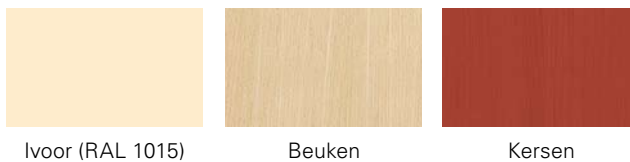

Ivoor (RAL 1015)

Beuken

Kersen