

# Invacare® | *Etude® Classic*



Tot 185 kg

## Comfort & veiligheid

De *Invacare Etude Classic* is gebaseerd op de principes van comfort en veiligheid. Dit heeft geleid tot een solide en zorgvuldig getest ontwerp. Veiligheid, stabiliteit (over het gehele bedoppervlak) en kracht (max. belastbaar gewicht van 220kg) zijn de sleutelwoorden die garanderen dat de *Etude Classic* optimale condities biedt voor het verlenen van zorg.



**Yes, you can.®**



### Waardigheid en onafhankelijkheid

Invacare **Etude Classic**'s grote hoogtebereik maakt het in en uit bed stappen eenvoudiger. Ook verzekert dit optimale omstandigheden voor de zorgverlening. Het gebruiksgemak wordt nog verder versterkt door de combinatie van het inlegraam, het grote hoogtebereik en de uitgekiende accessoires.

### Eenvoudig in gebruik en bij opslag

Heteenvoudig demonteren, transporteren en opslaan zijn zeer belangrijke aspecten in het ontwerp van de **Etude Classic**. Met een eenvoudige trekbeweging naar boven, komt het inlegraam uit de hoofd-/voetenborden. Vervolgens wordt het inlegraam in tweeën gedeeld en kan het geheel op de transportset worden geplaatst. De **Etude Classic** kan nu eenvoudig worden verplaatst met behulp van de eigen wielen van het bed. Het opbergen van het bed neemt maar weinig ruimte in wat dit bed uitermate geschikt maakt voor thuiszorgfaciliteiten.

### Bewezen kracht en stabiliteit

De **Etude Classic** voldoet aan alle eisen die gesteld zijn aan bedden in de Europese Standaard voor verpleegbedden (EN1970) en heeft de officiële goedkeuring van de TÜV voor zijn stijfheid, veiligheid en

stabiliteit. Interne tests in eigen fabriek, kwaliteitscontroles en een continue verbetering van bestaande ontwerpen zorgen voor een zeer compleet bed met uitstekende functionele eigenschappen.

### Eigenschappen en opties



**Etude Classic** is ook verkrijgbaar in een extra lage versie, waarvan de laagste stand 190 mm hoog is.



### **Etude Classic / Etude Classic Low / Etude Classic Extra Low**


Drie verschillende hoofd-/voetenborden voor hetzelfde matras bieden de mogelijkheid tot drie verschillende hoogteverstellingen.

### **Hoogteverstellingen:**

Classic: 400 - 800 mm  
 Classic Low: 300 - 700 mm  
 Classic Extra Low: 190 - 590 mm




**Eigenschappen en opties**

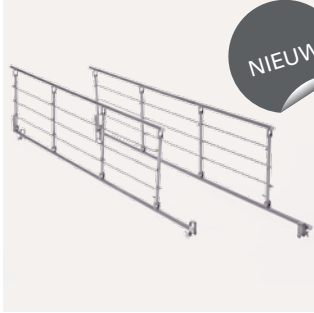

**Invacare Scala Basic 2**  
Inklapbaar metalen onrusthek. Voldoet aan de nieuwe veiligheidsnorm voor beddekken IEC 60601-2-52.



**Invacare Scala Medium 2**  
Inklapbaar metalen onrusthek voor dikkere matrassen. Voldoet aan de nieuwe veiligheidsnorm voor beddekken IEC 60601-2-52. 50 mm hoger dan **Scala Basic 2**.

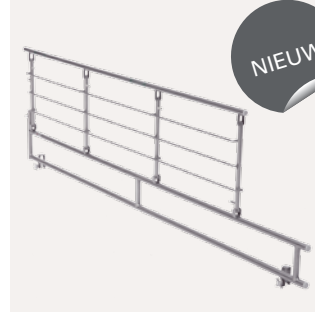

**Invacare Scala Decubi 2**  
Inklapbaar metalen onrusthek voor extra dikke matrassen. Voldoet aan de nieuwe veiligheidsnorm voor beddekken IEC 60601-2-52. 100 mm hoger dan **Scala Basic 2**.



**Spiraalkabels voor eenvoudig gebruik.**  
Spiraalkabels zijn alleen gebruikt op functies die uitbreidbaarheid behoeven.



**(De)monteren door 1 persoon zonder gereedschap.**



**Makkelijk onderhoud motoren.**

Motoren kunnen verwijderd worden zonder gebruik te maken van gereedschap en de bekabeling is eenvoudig te vervangen.



**Goed weggewerkte kabels**  
Het bed is zo ontwikkeld dat er geen loshangende kabels zijn en dat de kans op het beklemd raken van kabels tot een minimum wordt beperkt.



**Handbediening**  
Eenvoudig te bedienen door het gebruik van kleuren.



**Scandinavische stijl met een moderne uitstraling**  
Houten onrusthekken voor matrasmaat 2000 of 2200 mm.



**Individualiteit en aanpassingsvermogen**  
Bedverlengers geven een mogelijkheid om lengteproblemen op te vangen. Er is keuze uit +100 of +200 mm verlenging.



**Handgreep voor op het inlegraam**  
Beschikbaar in verschillende maten om het in en uit bed stappen veel eenvoudiger te maken.



**Transportset**  
Voor eenvoudig opbergen en verplaatsen.



**ACP-Box**  
Door het gebruik van de ACP-Box, kunnen alle functies van de handbediening worden geblokkeerd.



**Papegaai**  
Veilige ondersteuning in bed.

## Technische gegevens

<b>Etude Classic</b>	Breedte buitenmaat: 1030 mm Breedte binnenmaat: 900 mm	Lengte buitenmaat: 2280 mm Lengte binnenmaat: 2110 mm Matraslengte: 2000 mm	Hoogte: 400-800 mm	Maatvoering inlegraam: 3-delig: 850-240-910 mm 4-delig: 850-240-350-560 mm	Rughoek: 0° - 70°	Kniehoek: 0° - 25°

<b>Etude Classic</b>	Heuphoek: 0 - 25°	(Anti) trendelenburg*: 11°	3-delig: 73 kg 4-delig: 78 kg	Max. belastbaar gew: 220 kg Max. gebruikersgew.: 185 kg	

\* Let op dat dit alleen uitgevoerd wordt onder toezicht van deskundig personeel

**NB/** Dit bed is niet geschikt voor gebruik door patiënten jonger dan 12 jaar, of door patiënten met een lichaamslengte korter dan een gemiddelde 12-jarige.

## Framekleur en houtwerk



Licht grijs (Kisel)

Beuken

Producten, opties en eigenschappen kunnen wijzigen.