



Invacare®

Storm^{®4} X-plore

Simpelweg de beste - voor alle
soorten terrein!

LINX®



Geniet van alle voordelen van *Invacare's Storm⁴*, aangevuld met **onafhankelijke wielophanging, verhoogde schokabsorptie, meer comfort en betere grip** op oneffen terrein. Dit alles zorgt voor **verbeterde prestaties buitenshuis**.

De **Storm⁴ X-plore** is uw perfecte partner op alle soorten terrein. Belangrijke eigenschappen zijn:

- **4-wiel ophanging**
- **Goed op alle terreinen**
- **LiNX Smart Technology**



4-wiel ophanging

Vier individueel instelbare veren met geïntegreerde schokdempers garanderen **superieur comfort en tractie** op oneffen terrein. Standaard komt deze stoel met luchtbanden voor nog betere prestaties buitenshuis.

Goed op alle terreinen

Net als de *Invacare Storm⁴* wordt de **X-plore** gekarakteriseerd door zijn **gebruiksgemak**. Batterijen en elektronica zijn gemakkelijk toegankelijk waardoor onderhoud eenvoudig is uit te voeren. Ook de breedte van de *Invacare Modulite™* zitsystemen kunnen **eenvoudig worden ingesteld** tussen de 380 mm en 530 mm waardoor het systeem geschikt is voor verschillende gebruikersprofielen.

LiNX Smart Technology: Redefining Mobility

Invacare LiNX is ons besturingssysteem dat beschikt over een **zelflerende functie dankzij geavanceerde technologie** en zorgt voor een revolutionaire rijervaring. Het biedt adviseurs de mogelijkheid om elektrische rolstoelen sneller en gemakkelijker te configureren en af te stemmen.

De **LiNX** Smart Technologie krijgt programmeer- en onderhoudupdates die **draadloos en real-time** kunnen worden uitgevoerd. Met **eenvoudige toegang** tot statistische en diagnostische informatie biedt **LiNX** volledig inzicht voor adviseurs.



Touchscreen technologie

De REM400-bediening heeft een indrukwekkende 3,5" kleuren touchscreen waarbij **minimale kracht** nodig is voor de bediening. Nu de moderne technologie zijn weg heeft gevonden naar de markt van elektrische rolstoelen, kan deze innovatieve **interactieve bediening** worden geconfigureerd op basis van de fysieke en cognitieve mogelijkheden van de gebruiker.



Extra bedieningen

Voor degene die de standaard bediening niet kan gebruiken, biedt **LiNX** een selectie van andere bedieningen. Hierdoor wordt de **onafhankelijkheid** van de gebruiker vergroot. Het gaat om een compacte bediening, een compacte bediening waarbij minimale kracht nodig is voor gebruik, een kinbesturing en dubbele besturingsopties.

Eigenschappen en opties

USB-lader

2 x USB 2.0 ports leveren tot 1A per stuk om apparaten opgeladen te houden. Ophangstrip maakt eenvoudige bereikbaarheid mogelijk.



LiNX G-Trac® technologie

Voor meer complexe besturingsbehoeften zorgt **LiNX** voor een verbeterde functionaliteit en besturing terwijl **G-Trac** (optioneel) dit versterkt en ervoor zorgt dat de stoel de rijrichting aanhoudt zoals de besturing dat aangeeft.



Ingebouwde Bluetooth

De REM400-bediening geeft gebruikers de mogelijkheid om met 3 apparaten tegelijkertijd verbonden te zijn en kan gekoppeld worden aan een computermuis.



LED-verlichting

Attractief design met sterke en heldere verlichting voor optimale veiligheid.




Gekleurde labels

Personaliseer uw **Storm⁴** door te kiezen uit zes individuele kleuren voor de behuizing en voorwielophanging. Of bestel een gekleurde afdekkap door gebruik te maken van de Invacare UNIQUE service.



Reparatie en onderhoud

Elektronica, kabels, etc. zijn goed bereikbaar waardoor onderhoud snel en probleemloos kan worden uitgevoerd. Accu's zijn makkelijk uitschuifbaar; open de achterklep en trek.

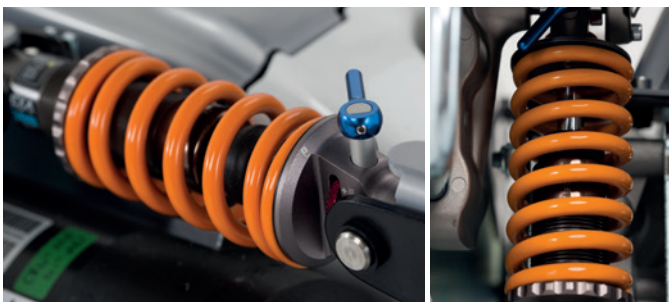

Ophanging

Aan de voorzijde van de **X-plore** kan de veerkracht en demping worden ingesteld naar de individuele behoefte van de gebruiker. De wielophanging aan de achterzijde is ontworpen voor het meest zware terrein.



25° Kantelverstelling

De zithoek kan handmatig of elektrisch gekanteld worden voor meer comfort en stabiele lichaamshouding.



30° Rugverstelling

De elektrische rugverstelling heeft een hoog draaipunt wat zorgt voor een natuurlijke houding.



Zitlift

De elegante telescopische zitlift heeft een hoogtebereik tot 250 mm. Het strakke design is zeer stabiel.



Modulite zitsysteem

De **Invacare Modulite** zitcomponenten zijn compatibel met alle elektrische rolstoelen van Invacare.

Technische gegevens

Meer informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.nl.

	Zitbreedte	Zitdiepte	Rughoogte	Totale hoogte	Rughoek	Hoogte armsteun	Totaalgewicht
Modulite™	380 - 530 mm ⁶	410 - 510 mm	480, 540, 560 mm ^{1,9}	1020 - 1190 mm	90 - 120°	275 - 340/ 325 - 390 mm ¹⁰ 245 - 310/ 295 - 360 mm ¹¹	174 kg ²
Recaro	490 - 530 (360) mm	460 - 510 mm	770 - 830 mm ¹	1300 mm	90 - 135°	250 - 340 / 290 - 380 mm	174 kg ²

	Zithoogte	Onderbeenlengte	Zithoek	Totale breedte	Totale lengte incl. voetsteunen	Totale lengte zonder voetsteunen	Max. gebruikersgewicht
Invacare Storm⁴ X-plore	440 - 690 mm ³ 450 / 480 mm zonder lifter	290 - 460 mm ⁴	0° - 25° ⁸	630 mm (wielbasis)	1190 mm ⁶	910 mm	150 kg

	Accu capaciteit	Draaicirkel	Max. klimbare obstakelhoogte	Veilige hellingshoek	Motorvermogen	Snelheid	Rijbereik
Invacare Storm⁴ X-plore	73.5 Ah	1770 mm	60 / 100 mm	tot 20% (11.3°)	340 W	6 / 10 / 12 km/u	tot 37 km ⁷



1. Gemeten vanaf zittingplaat
2. Verschilt per configuratie
3. Grond tot zittingplaat, zonder zitkussen
4. Gemeten van voetplaat, tot zittingplaat
5. + 50 mm armsteun verstelling
6. Beensteun in de grootste hoek

7. Afhankelijk van motorconfiguratie, gemeten volgens ISO 7176-4 @ 6 km/u
8. Elektrisch; manueel instelbaar 0-9°
9. Afhankelijk van keuze rugondersteuning
10. Met eendelige zitplaat
11. Met telescopisch zitframe

12. Invacare Modulite zitcomponenten zijn geheel uitwisselbaar binnen de Invacare range van elektrische rolstoelen en gedeeltelijk met de stoellijn van Invacare Rea®.

Kleuropties

Blue (RAL 5026)

Black (RAL 9005)

Champagne (0314)

Transparent Red (0200)

White (RAL 9016)

Olive Green (RAL 6003)



Niet vergeten, u kunt uw **Storm⁴** personaliseren door gebruik te maken van de Invacare UNIQUE service.

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland

Trusted Solutions,
Passionate People

