

AQUATEC®

Orca, Orca XL



Comfortabel en veilig baden /
Le confort et la sécurité dans le bain

INVACARE
Yes, you can.®

De *Aquatec Orca* badlift laat toe het bad in alle veiligheid te betreden. De badlift is bijzonder gemakkelijk te bedienen dankzij de ergonomische afstandsbediening met geïntegreerde batterij. Beschikbaar in verschillende versies naargelang de gebruiker: kantelbare rugleuning, XL-versie voor cliënten tot 170 kg, rugleuning met zijsteunen.

La gamme Aquatec Orca est une gamme d'élévateurs de bain permettant d'accéder à la baignoire en toute sécurité. Doté d'une télécommande ergonomique intégrant la batterie, il est très simple d'utilisation. Plusieurs configurations disponibles pour s'adapter à tous les utilisateurs: dossier inclinable, version XL pour des clients allant jusqu'à 170 kg, dossier avec maintiens latéraux.

- Haak op de rug voor de afstandsbediening / *Crochet pour la télécommande sur le dossier*
- Eenvoudige montage / *Montage simplifié*
- Transporttas / *Poignée de transport*



Kenmerken / Caractéristiques



Aquatec Orca XL


Max. gebruikersgewicht /
Poids max. utilisateur:
170 kg - Wit / Blanc
Code 1573685



Beschikbaar met zijsteunen voor rug. /
Disponible avec des maintiens latéraux de dossier.

Code 1573970 - Wit / Blanc
Code 1573974 - Blauw / Bleu

Lift in werking / Fonctionnement de l'élévateur

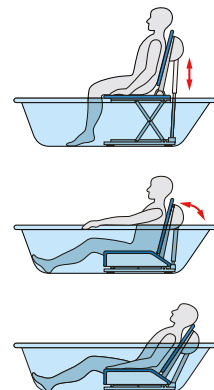

Onderdelen / Pièces détachées Orca, Orca XL

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ❶ Complete handbediening met spiraalvormige kabel / <i>Télécommande complète avec câble spiral</i> | 1470902 |
| ❷ Zuignappen met schroeven (per paar) / <i>Ventouses arrière à vis (la paire)</i> | 15071 |
| ❸ Zuignappen vooraan kliksyteem (per paar) / <i>Ventouses avant clipsées (la paire)</i> | 15072 |
| ● Complete oplader met kabel / <i>Chargeur complet avec câble</i> | 1471084 |
| ● Zitbekleding blauw / <i>Revêtement d'assise bleu</i> | 1470765 |
| ● Rugbekleding blauw / <i>Revêtement de dossier bleu</i> | 1470766 |
| ● Zit- en rugbekleding blauw / <i>Revêtement d'assise et de dossier bleu</i> | 1470767 |
| ● Rugbekleding wit voor de Orca met zijsteunen / <i>Revêtement de dossier blanc pour Orca avec maintiens latéraux</i> | 1471568 |
| ● Rugbekleding blauw voor de Orca met zijsteunen / <i>Revêtement de dossier bleu pour Orca avec maintiens latéraux</i> | 1471567 |

CAPACITEIT: 5 cycli stijgen/zakken voor een gebruiker van 140 kg. /

AUTONOMIE: 5 cycles de montée/descente pour une personne de 140 kg.

Opties / Options



Ergonomische handbediening / Télécommande ergonomique

Met geïntegreerde batterij. Bij ontlading, is het niet mogelijk om te zakken en dit voor een maximale veiligheid. / *Intégrant la batterie. En cas de décharge, il n'est pas possible de descendre à l'intérieur du bain pour un maximum de sécurité.*



Eenvoudige montage zonder gereedschap / Montage simple et sans outils

Orca 2-delig ontwerp zeer eenvoudig te monteren en lichtgewicht om mee te nemen. / *Conception de l'Orca en 2 parties très simple à monter et légère pour pouvoir le transporter.*



Antislip basis / Base antidérapante

Voor meer veiligheid. / *Pour plus de sécurité.*



Een veilige bevestiging en gemakkelijke installatie voor de handbediening. / *Système d'attache de la télécommande sécurisé et facile à installer.*



Afneembare hoes wasbaar op 60°. / *Housse amovible lavable à 60°.*



Duurzaam vijzelsysteem. / *Système de vérin très performant.*

Accessoires



Hoofdsteen voor / Appui-tête pour Aquatec Orca

Hoogteverstelbaar / *Réglable en hauteur*
Blauw / *Bleu* 15462
Wit / *Blanc* 15461



Veiligheidsgordel voor / Ceinture de maintien pour Aquatec Orca

Om veilig te baden. Heup- en borstgordel. / *Pour un bain en toute sécurité. Ceinture abdominale / poitrine.*
1528702



Zijflappen van de zit / Rabats latéraux de l'assise

Wanneer er steunbalken in de badkuip zijn gemonteerd. / *Lorsqu'il y a des barres de maintiens montées à l'intérieur de la baignoire.*
Code 15309. Breedte / *Largeur*: 350 mm.



Set verhogers / Rehausseurs jeu de 4

Kunnen de zit tot 60 mm verhogen. / *Peuvent rehausser l'assise jusqu'à 60 mm.*
15170 Verhoger 20 mm met zuignappen / *Hauteur 20 mm avec ventouses.*
14694 Verhoger 20 mm zonder zuignappen / *Hauteur 20 mm sans ventouses.*

Accessoires



Transporttas / Sac de transport

Met wielen voor transport en opslag.
/ Avec roulettes pour le transport et le stockage.

Aquatec **Orca** 14586

Abductieklos / Plot d'abduction

1525932 Plot 70 mm
1525933 Plot 120 mm

Technische kenmerken / Données techniques


Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website. / Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet Invacare. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Breedte zitting met zijsteunen / Largeur d'assise avec rabats latéraux	Breedte zitting / Largeur d'assise	Diepte zitting / Profondeur d'assise	Hoogte van de rug / Hauteur du dossier	Breedte van de basis / Largeur de la base	Lengte van de basis / Longueur de la base	Totale lengte / Longueur hors-tout
Orca	715 mm	375 mm	490 mm	665 mm	295 mm	580 mm	920 mm
	Breedte van de rug / Largeur du dossier	Totale hoogte / Hauteur hors-tout	Hoogte zitting / Hauteur d'assise	Totaalgewicht / Poids total	Gewicht batterij / Poids batterie	Max. gebruikersgewicht / Poids max. utilisateur	Machine wasbaar / Lavable en machine
Orca	360 mm	1075 mm	Max. 420 mm Min. 60 mm	10,8 kg	0,4 kg	140 kg Orca XL: 170 kg	Afneembare hoes wasbaar op 60° / Housse amovible lavable à 60°

Kleuren / Coloris

Wit / Blanc

Blauw / Bleu



Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Belgium

INVACARE
Yes, you can.®



© 2019 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. / Tous droits réservés. Indications données à titre d'information (information non contractuelle). Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.
Orca - BE - 06/2019