



Beperk de schuif- en wrijvingskrachten / Limitez les effets de friction et de cisaillement

De **Softform Premier MaxiGlide** matras beschikt over het gepatenteerde 'Glide' mechanisme. Deze matras biedt de patiënt een superieur niveau van comfort en is bedoeld voor patiënten die meer dan 15 uur/dag in bed vertoeven, en dus een verhoogd risico hebben op doorligwonden.

*Le matelas **Softform Premier MaxiGlide** dispose du système breveté 'Glide'. Il offre au patient un excellent niveau de confort et est conçu pour les personnes qui présentent un risque d'escarres moyen à élevé, et qui sont donc obligées de rester au lit plus de 15h/jour.*



Yes, you can.®



Opties / Options

Een gepatenteerd systeem / Un système breveté

Deze matras bestaat uit twee afzonderlijke delen gecombineerd in éénzelfde hoes. Deze 2 delen schuiven over elkaar op een glijoppervlak tijdens het verstellen van het bed. Dit innovatief gepatenteerde ontwerp vermindert het risico op schuif- en wrijvingskrachten ter hoogte van de gevoelige zones. Dichtheid HR schuim: 40kg/m³.

Ce matelas est composé de deux parties distinctes, combinées dans une même housse. Celles-ci coulissent l'une sur l'autre au-dessus d'une surface glissante, pendant le réglage du lit. Cette conception innovante brevetée réduit les risques de friction et de cisaillement au niveau des zones sensibles. Densité de la mousse HR: 40kg/m³.




Rits zit weggewerkt onder stuk hoes over de volledige lengte.

Fermeture éclair recouverte d'un rabat sur toute la longueur.



Dartex hoes, 2-zijdig stretch, waterresistent, gelast.

Housse Dartex, stretch, extensible en deux sens, imperméable à l'eau, soudée.

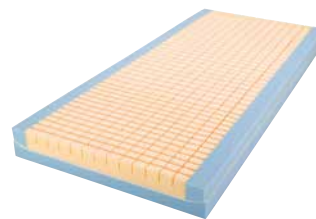

Anti-decubitus - Uitstekend drukverlichtend oppervlak

Prévention d'escarres - Limitation de pression excellente

Technische gegevens / Données techniques



Softform Premier MaxiGlide

Max. gebruikersgewicht /
Poids max. utilisateur :
247 kg



Reinigen / Nettoyer:
80°

Geproduceerd volgens de Europese Normen /
Produit selon les Normes Européennes :
Schuim / Mousse : BS 5852 Crib 5,
Hoes / Housse : BS 7175 Crib 5

Kleur / Couleur



Blauw / Bleu

Invacare N.V.
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 - 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 - 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2013 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden. /
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor de productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.

Softform Premier MaxiGlide - BE
02/2013



Yes, you can.®