


Weichlagerungsmatratze mit integriertem Gleitsystem



- Einzigartiges, patentiertes Gleitsystem
- Die obere Schicht der Matratze gleitet bei Liegeflächenverstellungen des Bettes (z.B. Hochfahren der Rückenlehne) über die untere Schicht. Damit werden die ansonsten auftretenden Scherkräfte vermieden.
- Dadurch signifikante Reduzierung von Scher- und Reibungskräften
- Der Patient bleibt während des Gleitvorgangs in seiner Position und rutscht nicht Richtung Fußende
- Dauerhafter Multistretch-Bezug mit 2-facher PU-Beschichtung, wasserabweisend und atmungsaktiv
- Verdeckter Reißverschluss schützt vor dem Eindringen von Flüssigkeiten
- Einsatzempfehlung: Dekubitusprophylaxe bis hohem Risiko und Therapieunterstützung bis Stadium III

Merkmale

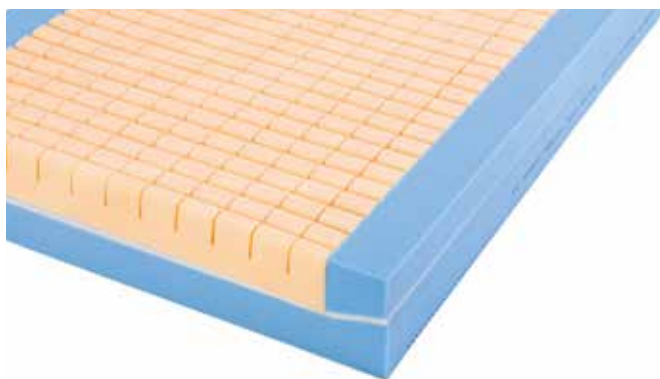

Zweilagiger Schaumstoff, Randzonenverstärkung für erhöhte Seitenstabilität



Integriertes Gleitsystem zwischen oberer und unterer Lage, die Scher- und Reibungskräfte werden hier nicht auf den Patienten übertragen

Technische Daten

Invacare® Softform Premier MaxiGlide	Bestellnummern
Standardmaß 900 x 2000 mm	1556628
Weiteres	
Gewicht	14 kg
Benutzergewicht max.	247 kg
Matratzenhöhe	152 mm
Waschtemperatur Bezug	80°
Trockner	bis 105°C
Farbe Bezug	Dunkelblau
Brandschutz	EN 597-1, 2 BS 7177: Crib 5

Prüfmethode nach Nr. 11-2 03/2004 MDS-Hi und nach Nr. 11-4 03/2004 MDS-Hi

Raumgewicht:

Schaumstoff Creme	38 - 40 kg/m ³
Schaumstoff Blau	38 - 40 kg/m ³

Stauchhärte:

Schaumstoff Creme	3,9 kPa
Schaumstoff Blau	6,3 kPa

Sondermaße:

(in allen Kombinationen erhältlich)

Breite (mm): 830, 855, 880, 900, 1000, 1100, 1200.

Länge (mm): 1900, 1950, 1980, 2000, 2030, 2100.