



Yes, you can.®

➤ Invacare® **SB 750**

Optimale functionaliteit en veiligheid in thuisverzorging en instellingen

Het *Invacare*® bed **SB 750** combineert optimaal comfort voor de gebruiker met een goede ergonomische werkhouding voor de verzorger. Het **SB 750** bed voldoet dan ook aan alle eisen van de Europese Standaardnormen op het gebied van bedden voor thuisverzorging en instellingen. **SB 750** biedt de gebruiker een optimale zelfstandigheid dankzij de handbediening met drukknoppen. Hiermee kunnen lig- en zitposities worden ingesteld en kunnen transfers eenvoudig worden uitgevoerd.





► **Onafhankelijkheid**

Het *Invacare*® **SB 750** biedt de gebruiker een hoge graad van autonomie en onafhankelijkheid. Alle functies van het bed worden eenvoudig in werking gezet door middel van de overzichtelijke handbediening. Deze handbediening is tevens voorzien van een groene knop waarmee het bed automatisch in relax stand wordt gebracht.



► **Ergonomie**

Het **SB 750** munt uit in ergonomisch design. De anatomische rugverstelling met virtueel draaipunt zorgt voor een optimale houding wanneer de patiënt wil gaan zitten of teruggaat naar de ligpositie. Bovendien kan het voetgedeelte lager dan horizontaal ingesteld worden. In praktische termen betekent dit een moeiteloze, zachte overgang van lig- naar relax positie.

► **Onderhoud**

Reinigen van het **SB 750** is kinderspel. Eenvoudigweg de springsluitingen losmaken en het hoofd- en voetgedeelte opheffen van het inlegraam. Bovendien is het **SB 750** zo ontworpen dat alle motoren op een snelle en eenvoudige manier vervangen kunnen worden, zelfs als de patiënt in bed ligt.



► **Veiligheid**

~~Voel je goed in het **SB 750**!~~ Met zijn gewaarborgde lange levensduur is het **SB 750** uiterst stabiel en slijtvast. De resultaten spreken boekdelen: ontworpen om te voldoen aan alle eisen van de Europese Standaardnormen (prEN 1970:1988), doorstaat het **SB 750** alle tests zonder op- of aanmerkingen.

Opties



Bedeinden in beuken- of kersenhout



Britt


Zijhekken in standaard en extra lange uitvoering.
Uitgevoerd in beuken- of kersenhout



Inlegraam in verscheidene modellen



Afneembare bedeinden in een aantal varianten leverbaar

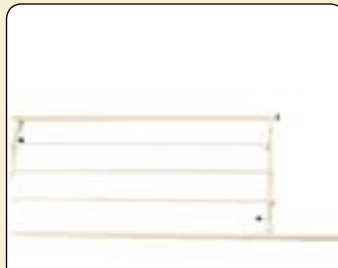

Scala

Inschuifbare metalen zijhekk



Papegaai met verstelbare triangel



Centrale beremming



Keuze uit Ø 100/125/150mm wielen



Soft control handbediening



Breed stalen inlegraam
105 / 120 x 200 cm



Kort inlegraam
85 / 90 x 180 cm



Markering van electronica
en kabels t.b.v. eenvoudige
montage

Technische gegevens




Binnenmaat:
85 / 90 cm
Buitenmaat:
95 / 101 cm




Binnenmaat: 208 cm
Buitenmaat: 213 cm
Matras maat: 200 cm



Hoog-laag:
36-083 cm
Totale hoogte:
160-207 cm

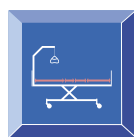


81 - 25 - 34 - 60 cm
(4-secties)

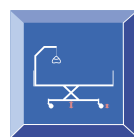


Bodemvrijheid:
15 cm




0° - 70°

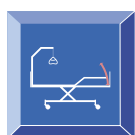


0° - 30°

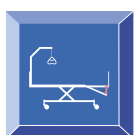

0 - 17°

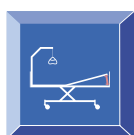

0° - 20°

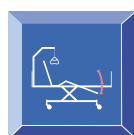


32°
(hoek onder frame)
18°
(hoek boven frame)



Maximale
belasting 220 kg

Standaard framekleur en houtkleur

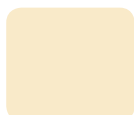

Ivoor



Beuken



Kersen