



Yes, you can.®

➤ Invacare® **Wheeler**

Opgroeien met de Invacare® Wheeler

- Kinderen groeien! Vooral in de lengte, en hun behoeften veranderen eveneens
- Alle kinderen zijn uniek en hebben verschillende gradaties van lichamelijke ontwikkeling
- De mogelijkheden van kinderen kunnen snel veranderen - de strijd van gisteren kan de overwinning van vandaag zijn
- De groei en ontwikkeling van een kind vragen om een volledig aanpasbare rolstoel - **Wheeler** heeft deze flexibiliteit!




JUNIOR



➤ **Licht rijden**

Optimale afstand van de arm tot de hoepel maakt het rijden makkelijk. U bereikt dit door de eenvoudige instelling van de zitting van de *Invacare® Wheeler*.



➤ **Dagelijks gebruik**

Het ontwerp kent een stijlvolle vormgeving en is speciaal ontworpen voor kinderen.




Kantelverstelling

De kantelverstelling met voetbediening garandeert eenvoudige instelling van de zithoek van de *Invacare® Wheeler* (optie).



Zitunit

De zitunits zijn uitwisselbaar en te combineren met kussens of alternatieven voor optimaal comfort en modulariteit.

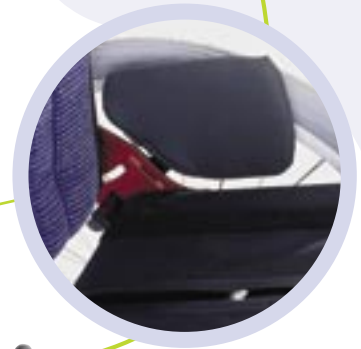

Heupondersteuning

De heupondersteuningen zijn in breedte verstelbaar om de gebruiker te ondersteunen bij het behouden van een zitpositie vanuit de middellijn.



Anti-tip systeem

Begeleiders kunnen het anti-tip systeem wegzwenken met één voetbeweging.



Frame

Wanneer het kind groeit, kunnen de zitting en rugleuning versteld worden. Tevens kunnen grotere wielen op het frame van de *Invacare® Wheeler* geplaatst worden.



Beensteunen

Optimale positie en ondersteuning wordt bereikt door de individueel en onafhankelijk instelbare voetplaten. De grote voetplaten zijn ook meervoudig instelbaar.



16" achterwielen zijn leverbaar. Afgebeeld met trommelremmen voor begeleider (optie).



Een brede range aan zitverstellingen om te voldoen aan individuele behoeften van kinderen tot 60 kg.



Een werkblad met handgreep biedt meer stabiliteit en is leverbaar als optie.

Technische gegevens

26, 29, 32, 35 cm	26 - 38 cm	38 - 50 cm	26 - 38 cm	15 - 26 cm	17 - 40 cm	-4° - +10°	-4° - +30°
ZB + 19 cm	90 cm	72 cm	71 cm	14 kg	60 kg	ISO 7176-19*	

N.B.
*) Onze rolstoelen voldoen aan de genoemde ISO norm en ISO 10542 en zijn uitgerust met eigenschappen die de veiligheid van de berijder vergroten tijdens transport in een ander (motor)voertuig. Rolstoel-gebruikers dienen, indien de situatie het toelaat, altijd plaats te nemen op een autostoel en gebruik te maken van de autogordel.

Standaard uitvoering

Invacare® **Wheeler** is een aluminium rolstoel met vast frame en een afneembare zitunit. Stabiliteit, zithoogte en zithoek kunnen aangepast worden door de zitpositie te wijzigen. De zitdiepte, heupondersteuning, breedte alsmede de rughoogte en rughoek zijn allen instelbaar. De zitunit is voorzien van naspanbare bekleding, 90° individueel instelbare beensteunen, hoogte verstelbare armsteunen, quick release achterwielen, vaste balhoofden, remmen en duwhandvatten.


Opties

- **Wheeler** spaakbeschermers
- Comfort zitunit op kunststof basis
- Twee typen hoofdsteunen
- Diverse kantelverstellingen
- Hielbanden of kuitsteunen
- Gipssteunen
- Gepolsterde of brede armsteunen
- Achterwielen 16"-24" en verschillende zwenkwielen
- Pelotten: Wegklapbaar of voor Comfort rugleuning
- Abductieklos
- Spatborden
- Duwbeugel
- Begeleidersremmen
- Rugtas
- Werkblad
- 4-punt bekkengordel
- 4° camber

Voor meer informatie:

- **Wheeler** Accessoires folder
- **Wheeler** Spaakbeschermer folder

Kleuren

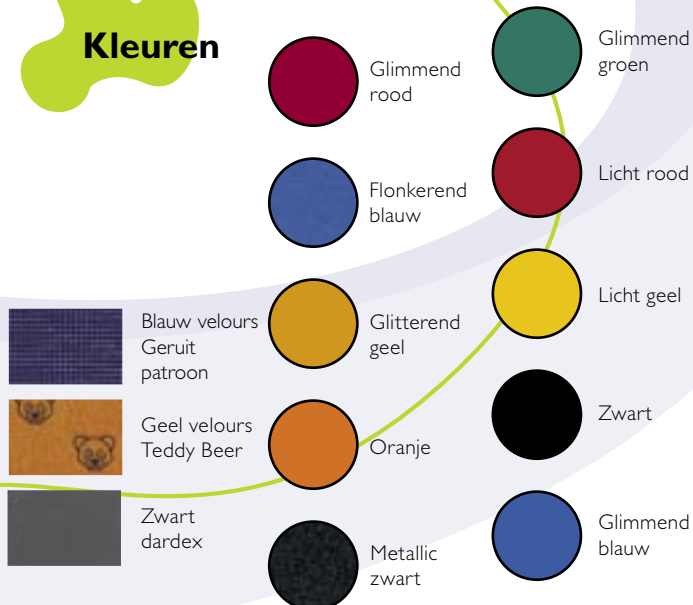

Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de realiteit.