



Yes, you can.[®]

> Rea[®] Bellis

Slimme oplossingen leiden tot unieke mogelijkheden

Het concrete bewijs dat slimme oplossingen leiden tot verhoogd comfort. De *Rea[®] Bellis* bezit talkrijke uniek eigenschappen die hem een volwaardig lid maken van de Rea familie.

Het verbeterd concept van de *Invacare[®] Flex2* stoel biedt individuele aanpassingsmogelijkheden voor een stabiele en comfortabele zithouding.





➤ **Slimme oplossingen leiden tot meer comfort**

Het moderne ontwerp van de Red® **Bellis** combineert fantastisch zitcomfort met uitstekende rijeigenschappen, hetgeen de **Bellis** een rolstoel maakt met ongekende mogelijkheden.

➤ **Comfortabel voor een ieder om te rijden**

De **Bellis** biedt veel mogelijkheden om de achterwielpositie in te stellen; dit maakt de rolstoel licht te berijden voor de gebruiker en makkelijk te duwen voor de begeleider.

➤ **Comfortabel om in te rusten**

De **Bellis** is uitgerust met een kantel- en rugverstelling bedienbaar door de begeleider of elektrisch bedienbaar door de gebruiker of begeleider. Tezamen met het ergonomisch gevormde zit- en rugkussen biedt dit een comfortabele positie om in te rusten.

➤ **Uitwisselbaarheid tussen producten**

De rugsteun bevestiging van de **Bellis**, **Rea® Assist**, en **Rea® Comfort** is opnieuw ontwikkeld om zo uitwisselbaarheid te creëren. Het **Invcare® Flex2** assortiment is inclusief verschillende rugsteun types, zodat de gebruiker zijn individuele comfort uit een breed assortiment kan samenstellen.





Invacare® Flex2 Assortiment
De instelbare **Flex2** zitbreedte, met optionele zitssystemen.




Lengte compensatie
Tijdens het kantelen van de rolstoel hebben zowel de hoofdsteun als de beensteunen een automatische lengte compensatie, door de biomechanische scharnieren.




Biomechanische rugscharnier
De positie van het rugscharnier houdt de gebruiker in dezelfde positie tegen de rugleuning in alle hoeken.



Zitplaat
Anatomisch gevormde zitplaat met diepte instelling biedt extra zitcomfort en stabiliteit.

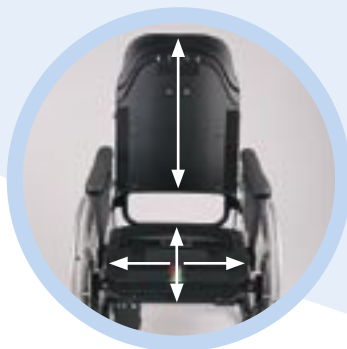

Afmetingen
De zitting is in breedte en diepte verstelbaar. De rugleuning is in hoogte verstelbaar.

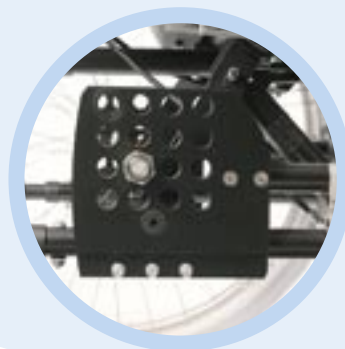

Achterwielbevestigings plaat
De Rea Bellis zithoogte kan makkelijk gewijzigd worden van minimaal 36cm tot maximaal 48,5cm. Ook de horizontale aspositie is makkelijk te veranderen.



Transport versie

De Rea® **Bellis** met Dardex® bekleding, inclusief een Invacare **Mistral2** rugkussen, centrale beensteunen en 16" transport wielen.



Heavy Duty versie

De Rea® **Bellis 150** is goedgekeurd voor een gebruikersgewicht van maximaal 150kg.




Laag Frame

Dit frame biedt zowel een lage zithoogte als kort zitdiepte bereik. Ontworpen voor gebruikers die willen trippelen. Gebruik van beensteunen blijft uiteraard mogelijk.

Zie ook:
Invacare® **Flex2 brochure**

Technische gegevens

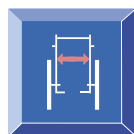


39 / **41** / 43 cm
44 / **46** / 48 cm
49 / **51** / 53 cm*



40 - 52 cm



36 - 48,5 cm
(met 10cm zitkussen)

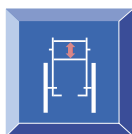

55,5 + 15 cm



23 - 33 cm




29 - 51 cm



-1° - +15°



0° - 30°

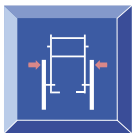


SB + 22 cm
SB + 26 cm (TBB)



110 cm



92 - 104 cm

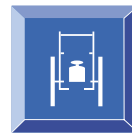

31,5 kg



125 kg



Transportgew.: 20kg
85 x (ZB +22cm)
x 45 cm



ISO 7176-19**

Note:

* Rea Bellis 150

** Onze rolstoelen voldoen aan de ISO 7176-19 norm en beschikken over eigenschappen die de veiligheid van de berijder vergroten tijdens transport in een (motor)voertuig. Zie gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Framekleur



Zilvergrijs

Bekleding



Grijs Dardex TR23



Grijs Velours TR32