



Yes, you can.®

➤ Invacare® **Storm³ True Track**

De sensatie van het rijden

De *Invacare*® **Storm³ True Track** geeft u absolute controle over uw mobiliteit!

De nieuwe technologie maakt het mogelijk om verder en sneller te rijden, waarbij het makkelijker wordt om obstakels te overwinnen.

De **Storm³ True Track** biedt meer controle te hebben om binnen-en buiten het huis te manoeuvreren, eenvoudig rechttuit te rijden over schuine wegen en oneffen terrein.





➤ **Verder en sneller**

Een nieuwe generatie motoren zonder tandwielkast. Dit biedt enorme voordelen voor de gebruiker zoals: grotere actieradius, meer kracht en ... **stilte!** Ook het nemen van obstakels wordt aanmerkelijk eenvoudiger.

➤ **U heeft de controle**

Invacare® **True Track** reageert direct en uiterst nauwkeurig, hetgeen u vertrouwen zal geven bij binnenshuis manoeuvreren en het buitenshuis nemen van obstakels. **True Track** kan geprogrammeerd worden naar uw persoonlijke behoefte en geeft u nog meer controle met de gehele range van de beschikbare **ACS** bedieningsaccessoires.

➤ **Als rijden op rails!**

True Track meet de omwentelingen van de wielen en geeft vervolgens kracht af naar de wielen om direct hellingen, stoepen en oneffen terrein te nemen, zonder er voor te moeten corrigeren. **True Track** volgt de joystick zonder tegenwerking van de zwaartekracht!

➤ **Betrouwbaar, programmeerbaar en uiteindelijk zeer economisch!**

True Track biedt betrouwbaarheid, doeltreffendheid en flexibiliteit. De 'gearless brushless motors' kennen geen componenten die aan slijtage onderhevig zijn. Dit betekent dat ze zeer betrouwbaar zijn en geen onderhoud behoeven. Om die reden geven wij 5 jaar * garantie op de motoren! In aansluiting kan de maximale snelheid van **True Track** geprogrammeerd worden zonder verlies van trekkracht.



Invacare® True Track toebehoren



Nieuw anti-tip systeem met vering

Zorgt voor een betere rijcomfort en voorkomt vastzitten op stoepen.



Vrijloophendel

Nieuwe, ergonomisch vormgegeven vrijloophendel, kan tevens gebruikt worden als controlerende rem.



'Gearless Brushless motoren'

Zijn zeer efficiënt aangezien 85% van de motor energie direct in voortbeweging van de rolstoel wordt omgezet.

Invacare® Storm³ / Invacare® Storm³ True Track opties voor buiten



Nieuw Recaro zitsysteem

Professionele autostoel voor solide zit, comfort en stabiliteit.



Gordels

Gordels voor betere stabiliteit; bekkengordel met velcro-sluiting.



Stoepenklimber/Spatborden


Opties voor buiten: neemt drempels van 10 cm en de spatborden beschermen onder alle omstandigheden.

Invacare® Storm³ True Track bedieningsopties



Tetra-bedieningskast

Met tetrabeugel en mini-joysticks voor bediening.

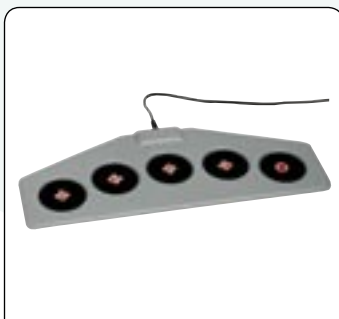

Wafer bord

Grote knoppen voor eenvoudige bediening (gaat altijd samen met 4- of 5-schakelaar module).



Buddy buttons

Grote knoppen voor bediening van verschillende functies.

Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de Invacare® Storm³ brochure.

Technische gegevens

Standaard	44 - 48 (43)	41 / 46 / 51	44 + 10 ^{*1} 44 + 30 ^{*2}	48 / 54 (5) ^{*3}	25 - 34 / 29 - 38	29 - 47	0° - 30°
Recaro	49 - 53 (36)	46 - 51	44 + 10 ^{*1} 44 + 30 ^{*2}	77 - 83 ^{*3}	25 - 34 / 29 - 38	29 - 47	0° - 30°
Comfort	44 - 48 (43) 49 - 53 (48)	41 / 46 / 51	44 + 10 ^{*1} 44 + 30 ^{*2}	64 (7) ^{*3}	25 - 34 / 29 - 38	29 - 47	0° - 30°
Flex	39 (38) 44 - 48 (43) 49 - 53 (48)	38 / 43 / 48	44 + 10 ^{*1} 44 + 30 ^{*2}	55 (7) ^{*3}	25 - 34 / 29 - 38	29 - 47	0° - 30°
Standaard	-10°/0°/7,5°/ 15°/22,5°/30°	63	97	110	88 (99) ^{*4}	145 ^{*6}	150 / 200 ^{*5}
Recaro	0° - 45°	63	127	110	88 (99) ^{*4}	150 ^{*6}	150 / 200 ^{*5}
Comfort	-10°-+45°	63	108	110	88 (99) ^{*4}	150 ^{*6}	150 / 200 ^{*5}
Flex	-10°-+45°	63	101	110	88 (99) ^{*4}	150 ^{*6}	150 / 200 ^{*5}
	70 Ah	83	6 / 10	20 %	500 W	± 57 km ^{*7}	10

*1 zonder zitkussen / met mechanische zithoogte instelling

*2 zonder zitkussen / met elektrisch hoog/laag verstelling

*3 zonder zitkussen

*4 met stoepenklimner

*5 met/zonder elektrisch hoog/laag verstelling

*6 + 5 kg met verstelmotoren

*7 met 6 km/u motoren, conform ISO 7176

Alle maten in cm en gewichten in kg

Framekleuren



Zilver metallic



Blauw



Groen