



Yes, you can.[®]

> Invacare[®] Pro-tech

NOUVEAU

Des solutions personnalisées

Invacare[®] Pro-tech est une gamme de coussins de dossiers et d'assises destinée aux fauteuils roulants.

Cette nouvelle gamme vient compléter le savoir-faire existant d'*Invacare[®]*, concernant l'adaptation des fauteuils roulants aux utilisateurs. Elle est composée des dossiers et accessoires **Pro-tech** et des coussins d'assise *Invacare[®] Flo-tech*.





➤ Une aide technique au positionnement

Les dossiers **Pro-tech**, grâce à leurs multiples réglages, permettent d'améliorer la position de l'utilisateur dans son fauteuil et ainsi d'accroître son autonomie et son niveau d'indépendance.

La coque du dossier **Deep Contour** est galbée sur les côtés pour assurer un maximum de maintien du tronc et de confort à l'utilisateur.

Les dossiers **Pro-tech** sont également réglables en hauteur et en inclinaison. Ils sont compatibles avec tous fauteuils électriques ou manuels, équipés de dossier fixe inclinable, comme ceux qui équipent les fauteuils *Invacare® Action 3 & 4*, *Invacare® Dragon*.



➤ Des matériaux de qualité facile à installer

Le dossier **Pro-tech** est réalisé en matériaux composite thermoformable revêtu de mousse souple pour assurer à l'utilisateur un confort de longue durée.

Le dossier se monte et s'enlève d'une seule main et ne compromet pas de ce fait le pliage du fauteuil. Il se fixe grâce au système de fixations **VERSALock®**, système breveté très facile d'installation qui permet de verrouiller en toute sécurité le dossier au fauteuil.



➤ Variété de coussins de haute qualité

5 coussins de différentes compositions pour toujours plus de confort et une meilleure personnalisation du fauteuil avec un large choix de taille et de profondeur.

Le coussin **Contour** est un coussin moulé et galbé en mousse HR.

Le coussin **Image** est un coussin moulé et galbé en mousse HR avec un insert ischiatique en gel viscofluide. Le coussin **Solution** est un coussin moulé et galbé en mousse HR intégralement recouvert d'un gel viscofluide réparti en sacs individuels pour assurer une bonne répartition du gel sous les ischions (système breveté).

Les coussins **Lite Visco** et **Contour Visco** sont des coussins moulés et galbés en mousse viscoélastique à mémoire de forme de différentes portances selon le poids et la taille de l'utilisateur : Souple, Medium, Forte, Très forte. La base est en mousse HR pour éviter tout risque de talonnement.




Système VERSALock®

Systeme innovant vous assurant un maximum de sécurité avec une grande facilité d'installation.



Système de fixation

Réglables et ajustables fixées en avant ou en arrière des tubes de dossier d'origine, ces fixations vous offrent une grande capacité de réglage ainsi qu'une grande solidité.

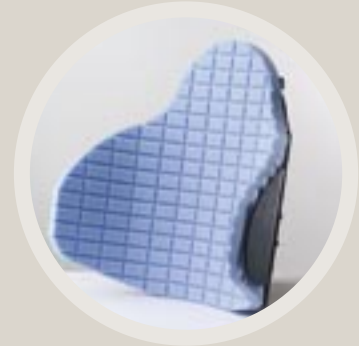

Maintien latéral Deep Contour

Systeme de mousse découpée qui s'attache au dossier par Velcro pour permettre à l'utilisateur d'ajuster au mieux la mousse sur le dossier.



Flo-tech Contour

Coussin moulé et galbé de densité 70 kg/m³



Flo-tech Image & Solution

Coussins moulés et galbés de densité 70 kg/m³ + sac de gel viscofluide.



Flo-tech

Lite Visco & Contour Visco

Coussins moulés et galbé de densité 90 kg/m³

Accessoires



Cale tronc



Appui-tête



Assise rigide



**Plot d'abduction et
plot d'adduction**



Gouttières hémiplégiques




Ceintures de maintien

Caractéristiques techniques

Pro-tech	De 23.5 à 43.5 cm	De 31 à 60 cm	Max 115 kg

Colori

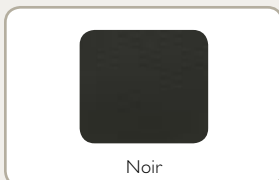

Noir

Indications données à titre d'information (information non contractuelle).

Invacare® se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.



INVACARE® POIRIER® S.A.S.
Route de St. Roch - 37230 Fondettes
Tél. : 02 47 62 64 66 - Fax : 02 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com - www.invacare.fr

