



Yes, you can.[®]

> Invacare[®] Storm³

La mobilité prend une nouvelle dimension !

Le fauteuil *Invacare[®] Storm³* apporte l'opportunité d'accéder à la vie active; pas seulement d'être à la bonne place au bon moment, mais d'être à la bonne hauteur et confortablement installé pour sortir, travailler, se détendre, se verticaliser.

Le **Storm³** est là pour aller plus haut, plus loin et plus vite.





➤ **Moteurs Heavy Duty**

Le fauteuil *Invarare*® **Storm**³ propose des moteurs Heavy Duty sur les versions 6 et 10 km/h en série, cela lui procure:

- Plus de puissance, pour gravir et franchir des pentes plus importantes (jusqu'à 20%) et les trottoirs.
- Plus de puissance, pour transporter des utilisateurs jusqu'à 200 kg!
- Plus de puissance, pour une utilisation extérieure ou intérieure avec un maximum de maniabilité.

➤ **Une assise modulaire**

En version classique (sans verticalisation) l'assise du **Storm**³ est composée d'une plaque réglable d'avant en arrière pour jouer sur le centre de gravité et ainsi optimiser la stabilité et la propulsion. De plus, la hauteur Sol / Siège du **Storm**³ est réglable en série de 44 cm à 54 cm afin de respecter et de s'adapter à chaque utilisateur.

➤ **La troisième dimension !**

Souhaitez-vous établir un contact visuel dans la foule ou être assis à la table d'un restaurant? Tout est possible avec le **Storm**³ grâce à sa base motrice très basse, son lifter innovant ou sa verticalisation, vous serez à la bonne hauteur au bon moment .

➤ **Un choix de cinq assises différentes et de verticalisation électrique**

Le **Storm**³ vous offre le choix entre cinq assises différentes avec des spécificités et des caractéristiques permettant de s'adapter aux besoins de chaque utilisateur. La verticalisation électrique quant à elle, permet à l'utilisateur de se mettre en position debout à n'importe quel moment de la journée.





Plaque d'assise réglable en largeur et en profondeur (sauf assise Standard)



Accoudoirs réglables en hauteur



Potences escamotables intérieure et extérieure



Levier unique de débrayage des moteurs



Hauteur Sol / Siège réglable



Fourches avant monobras



Double roulettes anti-bascule

Caractéristiques & options



Assise et Dossier Standard

Coussin d'assise et garniture de dossier réglable par bandes Velcro.



Assise et Dossier Contour

Meilleur confort et bon soutien.



Assise et Dossier Recaro

Siège de voiture professionnel et stylé offrant confort et performance



Assise et Dossier Flex

Dossier anatomique et pelotes réglables pour un soutien individualisé



Vari F avec palette monobloc

Repose-jambes réglables mécaniquement avec palette monobloc.



Cale-tronc / Extension de dossier / Appui-tête Flex

Procurent un bon maintien et un bon positionnement avec un confort maximal.



Lifter électrique

Permet d'ajuster la hauteur d'assise entre 44 cm et 74 cm (sans coussin). Le mouvement se fait vers le haut et l'avant.



Inclinaison de dossier électrique

Permet d'ajuster l'angle du dossier de façon autonome.



Inclinaison d'assise électrique

Permet de régler l'angle de l'assise de 0° à 25° de façon autonome.

Options



Nouvelle génération de repose-pieds et repose-jambes latéraux.



Un grand choix de palettes
Fixes / Réglables en angle /
Réglables en angle et en
profondeur / Monobloc.



Equipement route
L'éclairage avant / arrière et les
clignotants sont protégés contre
les coups. Un éclairage esthétique
et puissant, testé et conforme
aux normes européennes de la
circulation routière.



Accroche-taxi / Porte-bagage
Accroche-taxi arrière intégré au
porte-bagage.



Ceinture de maintien en H
Apporte un bon positionnement
et un bon maintien.



Monte-trottoir / Garde-boue
Le monte-trottoir permet de
franchir en extérieur des trottoirs
de 10 cm maximum. Le garde-
boue avant évite les projections
d'eau par temps humide.



Palette monobloc
Permet une position plus active.

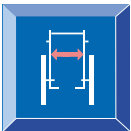


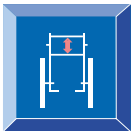
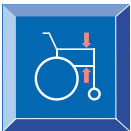





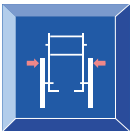



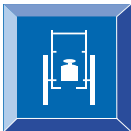

Pneus
Gris clair ou noir, anti-crevaillon
ou pneumatique.
Design exclusif Invacare®.


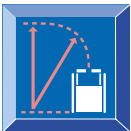




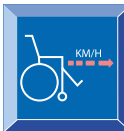


Commandes ACS
Toutes nos commandes ACS sont
compatibles avec le **Storm³**.

Caractéristiques techniques

							
Standard	44-48 (43)	41/46/51	44 + 10 ^{*1} 44 + 30 ^{*2}	48 / 54 (5) ^{*3}	25-34 / 29-38	29 - 47	0° - 25°
Recaro	49-53 (36/52)	46-51	44 + 10 ^{*1} 44 + 30 ^{*2}	77-83 ^{*3}	25-34 / 29-38	29 - 47	0° - 25°
Contour	44-48 (43) 49-53 (48)	41/46/51	44 + 10 ^{*1} 44 + 30 ^{*2}	64 (7) ^{*3}	25-34 / 29-38	29 - 47	0° - 25°
Flex	39 (38) 44-48 (43) 49-53 (48)	41/46/51	44 + 10 ^{*1} 44 + 30 ^{*2}	55 (7) ^{*3}	25-34 / 29-38	29 - 47	0° - 25°

							
Standard	-10°/0°/7,5°/ 15°/22,5°/30°	63	97	110	88 (99) ^{*4}	130 ^{*6}	150 / 200 ^{*5}
Recaro	0°-45°	63	127	110	88 (99) ^{*4}	135 ^{*6}	150 / 200 ^{*5}
Contour	-10°-+45°	63	108	110	88 (99) ^{*4}	135 ^{*6}	150 / 200 ^{*5}
Flex	-10°-+45°	63	101	110	88 (99) ^{*4}	135 ^{*6}	150 / 200 ^{*5}

							
Standard	70 Ah	83	6 / 10	20 %	220 / 350 / 500 W	45 ^{*7} / 57 ^{*8}	6 / 10 km/h
Recaro	70 Ah	83	6 / 10	20 %	220 / 350 / 500 W	45 ^{*7} / 57 ^{*8}	6 / 10 km/h
Contour	70 Ah	83	6 / 10	20 %	220 / 350 / 500 W	45 ^{*7} / 57 ^{*8}	6 / 10 km/h
Flex	70 Ah	83	6 / 10	20 %	220 / 350 / 500 W	45 ^{*7} / 57 ^{*8}	6 / 10 km/h

- *1 sans coussin d'assise / réglage manuel de la hauteur d'assise
 *2 sans coussin d'assise / réglage électrique de la hauteur d'assise
 *3 sans coussin d'assise
 *4 avec monte-trottoir
 *5 avec / sans réglage électrique de la hauteur
 *6 + 5 kg avec vérins / + 15 kg avec True Track
 *7 avec moteurs 6 km/h conforme ISO 7176
 *8 avec moteurs **True Track**[®]
- Mesures en cm et poids en kg

Coloris



Gris argenté



Bleu



Rouge



Couleurs RAL
(optionnel)