



**Yes, you can.<sup>®</sup>**

## **> Invacare<sup>®</sup> Storm<sup>3</sup>**

### **Vrijheid in een nieuwe dimensie!**

De *Invacare<sup>®</sup> Storm<sup>3</sup>* elektrische rolstoel biedt de vrijheid om een nieuwe dimensie te geven aan een actieve levensstijl. Niet alleen het juiste product op het juiste moment, maar ook de juiste hoogte in elke situatie. Of het nu gaat om een ontspannen houding tijdens een etentje of het overzicht behouden in een menigte, telkens de juiste hoogte en de juiste positie. Kortom, neem de vrijheid en verleg grenzen in de nieuwe dimensie.





### ➤ **Top prestaties**

De *Invacare® Storm<sup>3</sup>* is een krachtige elektrische rolstoel voor binnen en buiten met het vermogen om hellingen van 20% en obstakels van 6 cm te nemen en een afstand van 45 kilometer te overbruggen. Mede door de Heavy Duty motoren is een gebruikersgewicht tot 200 kg geen probleem. Het nieuwe frame design en het *Invacare® Advanced Control System* bieden verbeterde rijeigenschappen, comfort en stabiliteit in alle situaties; binnen én buiten.

### ➤ **Individueel instelbaar**

Onafhankelijk van het gekozen zitsysteem kan de zithoogte mechanisch versteld worden om een optimale zithoogte te kiezen die tegemoet komt aan de individuele behoefte van de gebruiker. De basis van het zitsysteem kan in breedte en diepte ingesteld worden om de individuele wensen te vervullen en kan tevens verplaatst worden om de ideale positie van het zwaartepunt en wendbaarheid te bereiken.

### ➤ **De derde dimensie!**

Wilt u oogcontact met anderen? Of wilt u aan tafel in het restaurant zitten? De lage zithoogte van *Storm<sup>3</sup>* gecombineerd met het nieuwe elektrische hoog / laag mechanisme, maakt het mogelijk om uw positie aan te passen aan de werkomgeving of de sociale situatie. De voorwaartse verplaatsing tijdens het gebruik van het elektrische hoog / laag mechanisme maakt het reiken naar voorwerpen in de hoogte een stuk makkelijker.

### ➤ **Positoneren voor comfort**

De *Storm<sup>3</sup>* is uniek met de keuze uit 6 verschillende zitsystemen, elk ontworpen voor de individuele en klinische behoefte. Dit waarborgt een comfortabele en veilige houding tijdens sociale aangelegenheden, werken en ontspanning! De nieuwe rughoekverstelling, de in hoek verstelbare beensteunen en de verstelbare armsteunen maken het mogelijk om vanuit een actieve positie over te gaan in een rusthouding met één beweging van de joystick!





**Breedte en diepte instelbare basis van het systeem**



**In hoogte verstelbare, afneembare armsteunen voor eenvoudige transfers**




**In hoek instelbare beensteunen, naar binnen en buiten wegzwenkbaar**



**Wegklapbare vrijloophendel**



**Heavy duty motoren voor 30% meer vermogen**

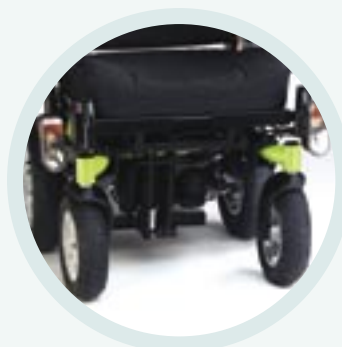

**Eenarmige vorken met een vernieuwd design voor minimale kans op beschadiging**



**Dubbele anti-tip wielen voor stabiliteit en het nemen van stoepen**

## Opties



### Standaard zitsysteem

Standaard zitsysteem met zitkussen en instelbare rughoek met naspanbare rugbekleding voor individuele instelling (niet in Nederland)



### Comfort zitsysteem

Comfort zitsysteem voor meer comfort en goede ondersteuning



### Flex zitsysteem

Flex zitsysteem met gevormde rugleuning en instelbare pelotten voor individuele ondersteuning



### Recaro zitsysteem

Professionele autostoel voor stijl, comfort en performance!



### Positionering

Rugverlenging, pelotten en hoofd/neksteun bieden de gebruiker extra zitcomfort.



### Electrische hoog / laag verstelling

Maakt het mogelijk de zithoogte van „laag” (44 cm) tot „hoog” (74 cm) in te stellen (gemeten zonder zitkussen; de gebruiker beweegt voorwaarts als de zitting omhoog gaat)



### Verstelbare rugleuning

Innovatieve rughoekverstelling met een groot verstelbereik. Mechanisch of elektrisch (optioneel) verstelbaar.



### Elektrische kantelverstelling

De gebruiker kan de zithoek - verstellen van 0° tot 25°.



### Vari F met doorlopende voetenplank

Mechanisch instelbare beensteunen met doorlopende voetenplank.

## Opties



### Verstelbare beensteunen

Ergonomische en automatische lengtecompensatie in de hoek verstelbare beensteunen voor optimale positionering (optie). Mechanische of elektrische hoekverstelling.



### Keuze uit 4 type voetplaten

Vast, opklapbaar. In hoek instelbaar.  
In hoek en diepte instelbaar.  
Doorlopende voetenplank.



### Verlichting

Voorzijde, richtingaanwijzer en achterlichten zijn beschermd tegen stoten, aparte vormgeving met grote stralingssterkte, getest conform de Europese standaard voor het wegverkeer.



### Transportbevestigingen - bagagerek

Bevestigingspunten voor voor- en achterzijde beschikbaar. Eenvoudige plaatsing van beademingsapparatuur.



### Bekken gordels - H-gordel

Bekken gordels voor meer stabiliteit; met velcrosluiting of clipsluiting (optie). Tevens is een H-gordel als optie leverbaar.



### Stoepenklimber (alleen op aanvraag) - Spatborden

Voor gebruik buitenshuis om 10 cm stoepen te nemen en spatborden voor alle weersomstandigheden.



### Stokhouder

De stokhouder beweegt met het zitsysteem mee.



### No more flat banden

**Storm<sup>3</sup>** is leverbaar met grijze en zwarte banden. Beiden kunnen geleverd worden in lucht of no more flat uitvoering, gevuld met een vloeistof.



### Advanced Control System

De Europese standaard voor besturing; modulair en programmeerbaar.

## Technische gegevens

Standaard	44-48 (43)	41/46/51	44 + 10 <sup>*1</sup> 44 + 30 <sup>*2</sup>	48 / 54 (5) <sup>*3</sup>	25-34 / 29-38	29 - 47	0° - 25°
Recaro	49-53 (36)	46-51	44 + 10 <sup>*1</sup> 44 + 30 <sup>*2</sup>	77-83 <sup>*3</sup>	25-34 / 29-38	29 - 47	0° - 25°
Comfort	44-48 (43) 49-53 (48)	41/46/51	44 + 10 <sup>*1</sup> 44 + 30 <sup>*2</sup>	64 (7) <sup>*3</sup>	25-34 / 29-38	29 - 47	0° - 25°
Flex	39 (38) 44-48 (43) 49-53 (48)	38/43/48	44 + 10 <sup>*1</sup> 44 + 30 <sup>*2</sup>	55 (7) <sup>*3</sup>	25-34 / 29-38	29 - 47	0° - 25°

Standaard	-10°/0°/7,5°/ 15°/22,5°/30°	63	97	110	88 (99) <sup>*4</sup>	130 <sup>*5</sup>	130°*/150°*/200
Recaro	0°-45°	63	127	110	88 (99) <sup>*4</sup>	135 <sup>*5</sup>	130°*/150°*/200
Comfort	-10°-+45°	63	108	110	88 (99) <sup>*4</sup>	135 <sup>*5</sup>	130°*/150°*/200
Flex	-10°-+45°	63	101	110	88 (99) <sup>*4</sup>	135 <sup>*5</sup>	130°*/150°*/200

Standaard	70 Ah	83	6 / 10	20 %	220 / 350 W	45 km <sup>*8</sup>	6 / 10 / 12 km/u
Recaro	70 Ah	83	6 / 10	20 %	220 / 350 W	45 km <sup>*8</sup>	6 / 10 / 12 km/u
Comfort	70 Ah	83	6 / 10	20 %	220 / 350 W	45 km <sup>*8</sup>	6 / 10 / 12 km/u
Flex	70 Ah	83	6 / 10	20 %	220 / 350 W	45 km <sup>*8</sup>	6 / 10 / 12 km/u

- \*1 zonder zitkussen / met mechanische zithoogte instelling  
 \*2 zonder zitkussen / met elektrisch hoog / laag verstelling  
 \*3 zonder zitkussen  
 \*4 met stoepenklimber

- \*5 + 5 kg met verstelmotoren  
 \*6 met 12 km/u HD-motoren  
 \*7 met elektrische zitlift  
 \*8 met 6 km/u motoren, conform ISO 7176

Alle maten in cm en gewichten in kg

## Framekleuren



Zilver metallic



Blauw



Groen

Invacare® behoudt zich het recht voor producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



Voor Nederland:  
 INVACARE® B.V.  
 Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede  
 Tel.: +31 (0) 318 - 69 57 57  
 Fax: +31 (0) 318 - 69 57 58  
 www.invacare.nl - Email: care@invacare.com

Voor België:  
 INVACARE® N.V.  
 Autobaan 14 · 8210 Loppem  
 Tel.: +32 (0) 50 - 83 10 10  
 Fax: +32 (0) 50 - 83 10 11  
 www.invacare.be - Email: belgium@invacare.com

