

INVACARE® TOP END®

Sport Rolstoelen

Zoals de naam reeds doet vermoeden, staat **Top End** voor topkwaliteit om sporters in staat te stellen altijd een winnende prestatie neer te zetten. Of het nu gaat om onze high-performance vastframe rolstoelen voor dagelijks gebruik of om onze sportproducten voor racing, basketbal, tennis of handbiken, wij zetten hoog in.

Top End maakt al sinds 1986 rolstoelen voor sport en recreatie. In eerste instantie ging het vooral om racing, maar al snel volgden de stoelen voor andere sporten, zoals basketbal, quad rugby en tennis. Vanaf 1990 is **Top End** tevens pionier als het gaat om handbikes en op dit moment hebben wij het breedste aanbod van de markt in dat segment. Met behulp van ons team van toegewijde sporters maakt **Top End** die ontwerpen die mensen willen.

Winnen zit in onze aard. We hebben de medailles in goud, zilver en brons in ons bezit om die uitspraak te onderbouwen. Kijk maar eens naar het succes van onze atleten om te zien wat er bereikt kan worden wanneer je gebruik maakt van een **Top End** rolstoel. "Winst door teamwerk" is onze missie bij **Top End**. Onze atleten werken nauw met ons samen om te proberen de producten die zij gebruiken steeds te verbeteren, zodat zij in de hoogste klasse van hun sport mee kunnen komen. Omdat wij deze verbeteringen doorvoeren in ons complete productaanbod, profiteren alle gebruikers hiervan.

Gelieerd aan onze filosofie om de grenzen steeds te verleggen als het gaat om rolstoelsporten, is **Top End** al 20 jaar de leider als het gaat om sponsoring voor tennis, basketbal en racing. Iedere rolstoel wordt op maat gemaakt om aan de eisen van de gebruiker te voldoen. Wij staan open voor suggesties, dus zeg ons wat je nodig hebt en wij ontwikkelen een **technologie die voor je werkt!**





Ade Adepitan - UK

INHOUD

<i>Invacare® Top End Force™ Handbikes Series</i>	4 - 5
<i>Invacare® Top End Force RX™</i>	6 - 7
<i>Invacare® Top End Eliminator OSR</i>	8 - 9
<i>Invacare® Top End Pro™ Basket-Ball / Tennis</i>	10 - 11
<i>Invacare® Top End Paul Schulte 7000 Series BB</i>	12 - 13
<i>Invacare® Top End T-5 7000 Series Tennis</i>	14 - 15
<i>Invacare® Top End Crossfire™ All Terrain</i>	16 - 17
<i>Invacare® Top End Terminator™ Titanium</i>	18
<i>Invacare® Top End Accessoires</i>	19 - 20
<i>Invacare® Top End Framekleuren en Pictogrammen</i>	21

INVACARE® TOP END® Force™ Handbikes Series



Invacare Top End Force-2



Yes, you can.®



Als je meedoet aan wedstrijden met de wil om te winnen, is er geen betere keuze dan de **Top End Force Handbike Series**. Ontworpen voor comfort en snelheid, zijn deze bikes aerodynamisch, robuust, stijlvol en **SNEL!** Ben je klaar voor de **Force?**

De *Invacare Top End Force-2* is een afgeleide van de beroemde **Top End Force** en is een geweldige fiets voor een exceptionele prijs. De fiets is startklaar, compleet met 27 versnellingen, performance wielen en Shimano® componenten. Of je nu gaat starten met fietsen of je bent een beginnende wedstrijdrijder, de **Force-2** is de perfecte fiets.

Het design van de *Invacare Top End Force G* biedt een instelbare, rompgedreven, rechte positie voor mensen met een lage verlamming, geamputeerden en sporters wiens kracht in bovenlichaam, armen, schouders en borst zit.

De *Invacare Top End Force K* is een knie-gepositioneerde handbike die in 2 op maat gemaakt versies verkrijgbaar is. De *Invacare Top End Force K Kneeler* is voor de atleten met de minste beperkingen. De *Invacare Top End Force K Double Amputee Kneeler* is speciaal ontworpen voor hen die dubbelzijdig boven de knie zijn geamputeerd. Het is een niet instelbare, op maat gemaakte bike die geheel volgens tekening gemaakt wordt.

EIGENSCHAPPEN EN OPTIES



Rughoekverstelling van 35 - 55° op de **Top End Force-2**.



Hands-on schakel- en remsysteem op de **Top End Force Series**.



Stootbumper.



De *Invacare Top End Force G* heeft een rughoekverstelling van 55 tot 90°.



TECHNISCHE GEGEVENS



86"
(circa 2184 mm)



Wielbasis: 60"
(circa 1524 mm)



Voor en achter:
26"



Rood: 15"
(circa 381 mm)
Blauw: 17"
(circa 432 mm)



17 kg



Max. 113 kg

Dit zijn de technische gegevens van de **Top End Force-2**. Wij verwijzen je naar het bestelformulier voor alle technische specificaties.

INVACARE® TOP END®

Force RX™



Yes, you can.®



Joel Jeannot - France

De *Invacare Top End Force RX* met verstelbare carbon rug of rug is de nieuwste wedstrijdhandbike van de *Invacare Top End Force Series*. Lichtgewicht en aerodynamisch zijn de twee belangrijkste kenmerken van deze handbike.

In verstelbare uitvoering biedt de *Top End Force RX* een liggend frame met een verstelbare vederlichte carbon rug. Het frame van 7005 aluminium is gefabriceerd met snelle zijframes uit één stuk, en meerdere mogelijkheden om probleemloos de rughoek in te stellen.

De *Top End Force RX* met geïntegreerde gevormde rug is ultra licht en extreem stijf. Er is keuze in vorkstijl en componenten. Deze handbike is een compleet op maat gemaakte racemachine!

EIGENSCHAPPEN EN OPTIES



Verstelbare carbon rug met opgeschroefde instelbare hoofdsteun.



3 verschillende vorkstijlen verkrijgbaar: vaste lengte met verticale hoogte verstelling (standaard), vaste hoogte of zowel diagonaal als verticaal instelbaar.



SRAM® X9 30 versnellingspook en rem standaard gemonteerd op het rechter handvat.



Extra sterk gebogen voorvork.



Heinz Frei - Switzerland

TECHNISCHE GEGEVENS



Wielbasis:
60° - 62°
(circa 1524 - 1575 mm)



Voor en achter:
26" of 700C



13" - 16"
(circa 330 - 406 mm)



Circa 11.5 kg



Max. 113 kg

Voor alle technische specificaties verwijzen wij je naar het bestelformulier.

INVACARE® TOP END® Eliminator OSR



Yes, you can.®



De *Invacare Top End Eliminator OSR* racefiets is ontworpen voor snelheid. De superrigide horizontale hoofdbuis zorgt samen met de optimale voorvorkhoek voor exceptionele stabiliteit en aerodynamica en daardoor is dit model de beste keuze voor kampioensracers. Als je jouw vizier richt op het winnen van wedstrijden, dan helpt de *Top End Eliminator OSR* je om als eerste over de streep te komen.

De *Invacare Top End Eliminator OSR* wordt op maat gemaakt om het beste uit iedere atleet te halen door een combinatie van eigen kunnen en een optimale positie op maximale snelheid. De standaard positie is aanbevolen voor atleten met beperkte balans, die meer ondersteuning nodig hebben. De atleet kan op de traditionele manier zitten met zijn/haar voeten op een voetplaat of de fiets gebruiken in knielende positie, zodat dit model ideaal is voor beginnende racers. De knielende positie is vooral voor ervaren racers die een goede balans hebben.

Er zijn 4 verschillende kooistijlen beschikbaar op de *Top End Eliminator OSR* zodat iedere atleet op zijn eigen manier transfers kan maken. De I-, V, en open V-kooien worden aangeboden op de standaard OSR racefiets. De open V-kooi is het populairst omdat daarbij de meeste beenruimte beschikbaar is om transfers te vereenvoudigen. De U-kooi is alleen verkrijgbaar op het kniel-model; deze dient nauwkeurig te worden aangemeten.

EIGENSCHAPPEN EN OPTIES



Top End Eliminator OSR met een relaxte hoofdbuishoek voor uitzonderlijke stabiliteit.



Bovenmaatse vork is standaard, Corima carbon voorwiel is verkrijgbaar als optie.



Het precisie-track systeem zorgt voor maximum snelheid op de weg en door iedere bocht.



Open V-kooi met open camberbuis voor meer beenruimte.



TECHNISCHE GEGEVENS



64° - 76°
(circa 1626 - 1930 mm)



Max. 113 kg

Voor alle technische specificaties verwijzen wij je naar het bestelformulier.

INVACARE® TOP END® Pro™ Basket-Ball / Tennis



Yes, you can.®



De *Invacare Top End Pro* is ontworpen om atleten te inspireren die duurzaamheid zoeken in een rolstoel, maar die ook snel en gemakkelijk aanpassingen aan hun stoel willen kunnen doen. Beschikbaar in 2 versies - net zo geschikt voor basketbal als voor tennis - is de *Top End Pro* verkrijgbaar in een laag en een hoog frame om in de behoeften te voorzien van gebruikers met verschillende posturen. Het enige dat hoeft te gebeuren is het opmeten van de zitbreedte, zitdiepte en wielmaat; kies de kleur en... het spel kan beginnen.

De *Invacare Top End Pro* heeft een compleet gelast aluminium frame met een vaste camber, die dezelfde stijfheid en duurzaamheid geeft als onze *Top End T-5* en *Top End Paul Schulte BB*. De *Top End Pro* heeft high performance sportwielen, hogedruk banden, quick release assen en een instelbare swivel anti-tip met een 58mm vijfde wiel.

Wat deze stoel anders dan alle andere tennis- en basketbalstoelen maakt, is het gemak waarmee hij kan worden aangepast. De stoel kan tussen wedstrijden door worden aangepast met behulp van ons exclusieve 'quick release' systeem voor de zithoogte achter. De instelbare voetplaat zorgt voor de perfecte voetpositie, of die nou achterwaarts gericht is of juist meer naar voren. Het design biedt tevens een voetenstop en een fixatie om de voeten vast te zetten.


EIGENSCHAPPEN EN OPTIES



De zithoogte voor en het zwaartepunt kunnen worden aangepast.



Quick release hendel om de zithoogte achter eenvoudig aan te passen.

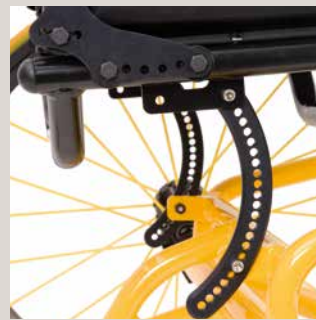

De zithoogte achter is aan te passen.



Fixatiebanden zijn verkrijgbaar in 3 verschillende maten (small, medium, large).



TECHNISCHE GEGEVENS



10" - 20"
(circa 254 - 508 mm)



12" - 18"
(circa 305 - 457 mm)



Voor: 17" - 21"
(circa 432 - 457 mm)
Achter: 13" - 21"
(circa 330 - 533 mm)



9" - 18"
(circa 229 - 457 mm)



Max. 113 kg



Voor alle technische specificaties verwijzen wij je naar het bestelformulier.

INVACARE® TOP END® Paul Schulte 7000 Series Basket-Ball



Yes, you can.®



Paul Schulte (USA)

De **Top End Paul Schulte 7000 Series BB** in 7000 Series aluminium is sneller, sterker en beter dan ooit tevoren. Nieuw materiaal en een verbeterd voorvorkdesign en as-systeem zorgen voor een gewichtsvermindering van circa 1,5 kg en verbeterde prestaties. Wie wil dat nou niet?

Een winnende line-up

De **Invacare Top End Paul Schulte 7000 Series BB** is een rolstoel voor sterspelers en biedt op maat gemaakte prestaties in een perfect design. Atleten scoren beslist met de **Invacare Top End Paul Schulte 7000 Series BB**.

Een nieuw design

De **Invacare Top End Paul Schulte 7000 Series BB** is verkrijgbaar in 7000 Series aluminium en wordt gebouwd volgens jouw exacte specificaties (vaste rug, zithoogtes, as positie, anti-tip, offensive wing en positie van de wielen). Deze rolstoel heeft een ergonomisch design, zonder overbodige bouten en schroeven die de stoel zwaarder en daarmee trager maken.

Dit is een rolstoel voor diegenen die de absolute top in hun tak van sport willen bereiken. Wanneer je de perfecte stoel zoekt om op te vertrouwen, dan is dit wat je zoekt!


EIGENSCHAPPEN EN OPTIES



Dubbele swivel anti-tip of vijfde wiel. In hoogte verstelbaar.



Geïntegreerde zijschotten voor een "één-met-je-rolstoel"-gevoel.

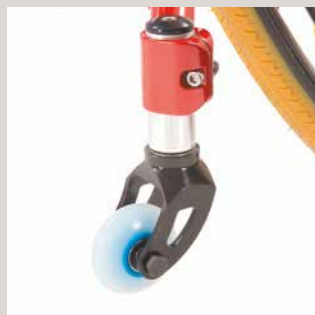

Hoogte instelbare swivel anti-tip en een 58 mm wiel voor een snelle wendbaarheid.



Optioneel: basketbal drager.



LUZIR

TECHNISCHE GEGEVENS



12" - 21"
(circa 305 - 533 mm)



12" - 19"
(circa 305 - 483 mm)



Voor: 14.5" - 20 7/8"
(circa 368 - 530 mm)
Achter: 14.5" - 20 7/8"
(circa 368 - 530 mm)



Vast: 8" - 15.5"
(circa 203 - 398 mm)
Verstelbaar: 9" - 18"
(circa 229 - 457 mm)



Max. 159 kg



Voor alle technische specificaties verwijzen wij je naar het bestelformulier.

INVACARE® TOP END® T-5 7000 Series Tennis



Yes, you can.®

INVACARE® TOP END® T-5 7000 Series Tennis



Michael Jeremiaz - France

De *Invacare Top End T-5 7000 Series Tennis* steelt de show voor tennisliefhebbers. Kies de tennisrolstoel die bij je past, in een vast of instelbaar frame, ook verkrijgbaar in 7000 Series aluminium: met de *Top End T-5 7000 Series Tennis* ligt de bal bij jou!

Nieuw materiaal

In vergelijking met titanium frames is het gewicht van de *Top End T-5 7000 Series Tennis* in 7000 Series aluminium lager en de stoel sterker en stijver dan ooit. De kracht van 7000 aluminium legering is nog verder vergroot dankzij *Invacare Top End's* vooruitstrevende hittebehandeling en poedercoating.

Game, set en match

Professionele spelers weten dat de plaatsing van de voeten enorm belangrijk is in het rolstoeltennis. Dankzij de keuze tussen verschillende voetsteunen is de *Top End T-5 7000 Series Tennis* speciaal bedoeld voor topspelers. Atleten kunnen er ook voor kiezen om hun prestatie te verhogen door het gebruik van zijschotten, fixatiebanden en toe-clips.

Voor professionele spelers die geen compromissen sluiten!


EIGENSCHAPPEN EN OPTIES



Vaste swivel anti-tip, in hoogte instelbaar.



Gestroomlijnde gebogen frame onderdelen geven een strak uiterlijk en bieden stijfheid en duurzaamheid.

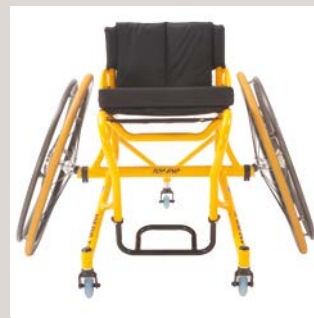

Op maat gemaakte voorframe hoek, voetenbreedte, aspositie en wielbasis.



Zwaartepunt instelling optie.



Aniek van Koot - NL

TECHNISCHE GEGEVENS



12" - 21"
(circa 305 - 533 mm)



12" - 19"
(circa 305 - 483 mm)



Voor: 14.5" - 21"
(circa 368 - 533 mm)
Achter: 14.5" - 21"
(circa 368 - 533 mm)



Vast: 8" - 15.5"
(circa 203 - 398 mm)
Verstelbaar: 9" - 18"
(circa 229 - 457 mm)



Max. 113 kg



Voor alle technische specificaties verwijzen wij je naar het bestelformulier.

INVACARE® TOP END® Crossfire™ All Terrain



Yes, you can.®

INVACARE® TOP END® Crossfire™ All Terrain



De *Invacare Top End Crossfire All Terrain* rolstoel is de monstertruck onder de rolstoelen en is ontworpen om een ferme indruk te maken.

Met hart en ziel!

Hou je van vissen, kamperen, jagen, kajakken, tuinieren of naar het strand gaan? Je kunt dit (en meer!) allemaal doen met de *Invacare Top End Crossfire All Terrain*. Deze rolstoel biedt veel stabiliteit en kan gebruikt worden op de meest oneffen terreinen.

Outdoor activiteiten en vrijheid

De *Invacare Top End Crossfire All Terrain* is gemaakt van lichtgewicht aluminium en heeft ruwe, extra grote achterwielen en dito voorwielen, die gezamenlijk voor een goede tractie zorgen. Deze all terrain rolstoel stelt je echt in staat overal heen te gaan waar je wilt.

EIGENSCHAPPEN EN OPTIES




Verstevigde voorzijde voor voor- en zijwaartse stabiliteit.



Remmen optioneel.



Voetplaatverhogers (optioneel).

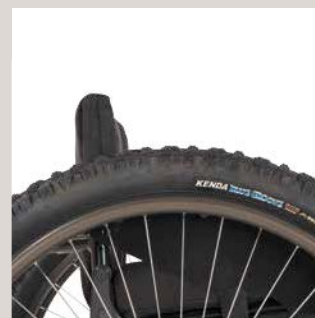

24" of 25" x 2,75" ruwe wielen en banden.



TECHNISCHE GEGEVENS



14" - 20"
(circa 356 - 508 mm)



14" - 20"
(circa 356 - 508 mm)



Voor: 19" - 21"
(circa 483 - 533 mm)
Achter: 15" - 20"
(circa 381 - 508 mm)



9" - 20"
(circa 229 - 508 mm)



Max. 113 kg

Voor alle technische specificaties verwijzen wij je naar het bestelformulier.

INVACARE® TOP END® Terminator™ Titanium



De *Invacare Top End Terminator Titanium* is verkrijgbaar met een reeks aan zithoogtes, wielen, armleuningen en voetsteunen en wordt speciaal op maat gemaakt naar jouw specificaties.

De *Invacare Top End Terminator Titanium* is een volledig op maat gemaakte rolstoel die perfect past bij een actieve levensstijl.

Hij biedt het allernieuwste op het gebied van technologie en comfort. De *Invacare Top End Terminator Titanium* combineert mooi design met de sterkst mogelijke en lichtste materialen. Hierdoor ontstaat een uitstekende stoel die perfect bij jouw postuur past en ongelooflijke prestaties neerzet.

EIGENSCHAPPEN EN OPTIES



Voorframe beschermers.



Stokhouder als optie verkrijgbaar.



Vering aan de achterzijde als optie verkrijgbaar.



Spinergy wielen: licht, rigide en robuust. Verkrijgbaar in verschillende kleuren spaken.



TECHNISCHE GEGEVENS



12" - 18"
(circa 305 - 457 mm)



14" - 18"
(circa 356 - 457 mm)



Voor: 17" - 21"
(circa 432 - 533 mm)
Achter: 14,5" - 21"
(circa 368 - 533 mm)



Verstelbaar: 9" - 20"
(circa 229 - 508 mm)
Vast: 8" - 16"
(circa 203 - 406 mm)




Max. 180 kg




Voor alle technische specificaties verwijzen wij je naar het bestelformulier.

INVACARE® TOP END®

Accessoires

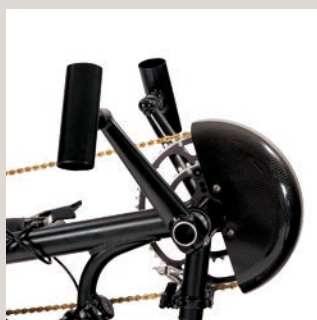

Carbon kettingkast verkrijgbaar op **Top End Force RX™**.

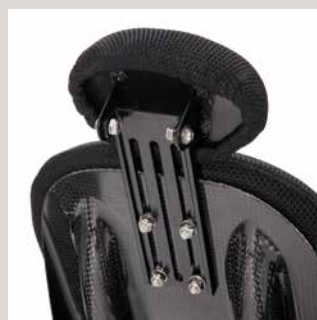

Opgeschroefde instelbare hoofdsteun standaard op **Top End Force RX**.




Verstelhaak voor carbon rug op **Top End Force RX**.



Snel, lichtgewicht en aerodynamisch design van de **Top End Force RX**.



Vernelling met rem op de **Top End Force RX**.

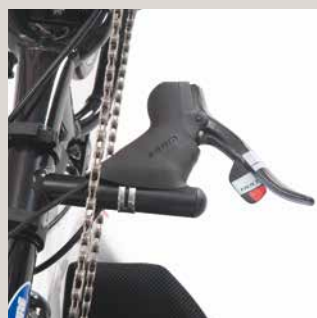

SRAM RED dubbele versnellingspook verkrijgbaar op **Top End Force RX**.



Voetsteun en bumper aan één stuk.



Breedte voetsteun is circa 95 mm of 120 mm op de **Top End Force™ Series**.



SRAM® Trigger Shifter.



Handpedalen met power plates.




Shimano® 7-versnelling met twist shifters.



Amputatiesteun (met kussentje) op de **Top End Force™ G**.



Gemonteerde spiegel op de **Top End Force Series**.

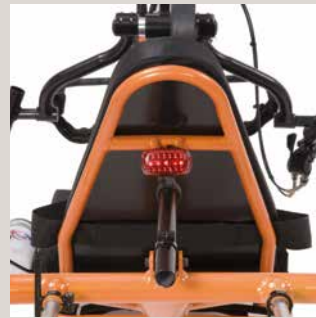

Achterlicht op de **Top End Force Series**.



Bidon met houder op de **Top End Force Series**.




24" Spineroy LX achterwielen met 12 spaken, verkrijgbaar in geel, zwart, wit, rood en blauw.



26" **Top End** / Spineroy® Carbon wiel met hoepel voor **Force Series**.



Kenda® banden, verkrijgbaar in rood en geel.

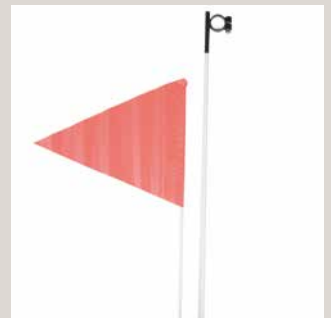

Veiligheidsvlag verkrijgbaar op **Top End** handbikes.



Gereedschapset voor de **Top End** handbikes.



Inhoud gereedschapset.




Invacare **Top End** wielen tas.




Reistas voor de Invacare **Top End Force**.



Vaste voetsteun op de **Top End Eliminator** Standaard.

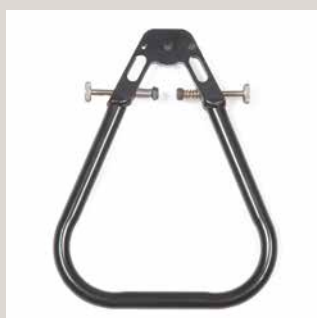

Standaard aluminium track control (driehoek) op de **Top End Eliminator**.

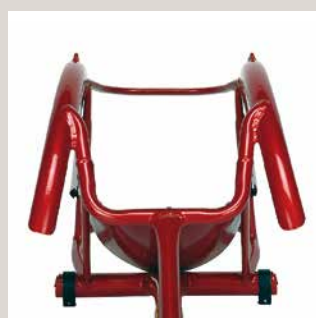

U-Kooi met knie-platform op de **Top End Eliminator**.




Invacare **Top End** jersey.

FRAMEKLEUREN




Midnight Blue

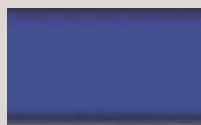


Electric Blue ¹



Grasshopper Green

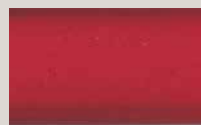

Tangerine Red

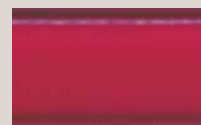

Electric Red ¹



Orange



Safety Yellow



Grape Madness



Wet Black



White Snow



Silver Metallic



Bubblegum Pink



Stealth Black

^{1/} Raspberry Red en Royal Blue zijn vervangers voor Electric Red en Electric Blue op de *Invacare Paul Schulte Signature Basket-Ball*, de *Force Handbike Series* en de *Eliminator OSR* stoelen.

PICTOGRAMMEN



Zitbreedte



Zitbreedte op handbike



Zitdiepte



Wielbasis



Totale lengte



Rughoogte



Wielmaat



Gebruikersgewicht



Zithoogte



Gewicht handbike

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafkondiging.

De reproductie van deze brochure op elektronische, mechanische of andere wijze, waaronder fotokopieren en scannen en door iedere vorm van informatieopslag, inclusief elektronische verzending is verboden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Invacare International Sàrl.



Invacare küschall®-club



Speciaal voor actieve rolstoelgebruikers heeft Invacare de küschall-club opgezet.

U kunt zich kosteloos aansluiten bij deze club en zo gebruik maken van diverse voordelen:

- 5% extra PGB korting bij aanschaf van een nieuwe küschall rolstoel of Top End sportrolstoel/handbike van uw persoonsgebonden budget (via uw dealer);
- Aanbiedingen op küschalls exclusieve lifestyle collectie (via uw dealer);
- Extra kortingen op küschalls rolstoel accessoires (via uw dealer);
- Mailingen waardoor u als eerste op de hoogte bent van nieuwtjes m.b.t küschall en Top End;
- Uitnodigingen voor of extra attenties bij (rolstoel)evenementen

Bestellingen plaatst u eenvoudig bij uw vertrouwde dealer onder vermelding van uw naam en küschall-clubnummer.

U kunt zich aanmelden voor de küschall-club door een mail te sturen naar nederland@invacare.com.

U krijgt dan de küschall-club kaart zo snel mogelijk thuisgestuurd.

TECHNOLOGY THAT WINS

Invacare B.V.

Celsiusstraat 46 - 6716 BZ Ede - Nederland - Tel.: +31 (0) 3 18 - 695757 - Fax +31 (0) 3 18 - 695758
Email: nederland@invacare.com - www.invacare.nl

© 2013 Invacare International Sàrl. Alle rechten voorbehouden.

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Invacare behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.
TopEnd 2013 - NL - 01/2013



Yes, you can.®