

Invacare® | **XPO₂**



Den oxygen du behøver, hvor end du er

Invacare **XPO₂** er en sikker og bærbar oxygenkoncentrator. Ideel for den aktive og rejselystne bruger, som er afhængig af oxygentilførsel. Det pulserende system vil sørge for, at alle iltpatienter bliver korrekt behandlet. **XPO₂** er udviklet i et stilfuldt design og er samlet i en kompakt, let og samtidig robust enhed.



Yes, you can.®



Ambulant oxygentilførsel med stor uafhængighed

Med sit kompakte og lette design opmuntrer **Invacare XPO₂** aktive patienter til, at få en så uafhængig livsstil som muligt. Med sine kun 2,9 kg udvider **XPO₂** klassificeringen af transportable iltkoncentratorer. Muligheden for at lade og betjene koncentratoren fra både stationær stikkontakt og autolader opretholder den uafhængighed, som ellers kan savnes ved traditionelle former for ambulant oxygentilførsel. Ekstra batterier til **XPO₂** betyder yderligere frihed, da hvert batteri giver 2½ time* autonomi.

* Baseret på indstilling 2 ved 20 bpm (breaths per minute).

Invacare teknologien leverer den perfekte transportable løsning

XPO₂ er den perfekte løsning for dem, som ønsker at reducere udgifterne ved transportabel oxygen samtidig med, at det høje serviceniveau fastholdes. Brugervenligheden, effektiviteten og det kompakte og lette design, sikrer patienten frihed til at komme omkring.

Klinisk effektiv spareventil

XPO₂ har en patenteret "non-linear pulse dose" spareventil, der er designet til, at efterligne den volume, der leveres ved kontinuerligt flow. Dette gavner patientens oxygenmætning. Spareventilen tilfører oxygen i begyndelsen af vejrtrækningen, hvilket giver maksimal oxygenudbytte. Med 900 ml. oxygen produktion,

høj oxygen renlighed, præcis udløssersensitivitet, hurtig reaktionsevne og behagelig bolus levering, garanterer **XPO₂**, at patienten holder oxygenmætningen. **XPO₂** producerer terapeutisk oxygen op til 35 bpm ved alle indstillinger. Pulsindstillingerne 1-5 sikrer, at **XPO₂** dækker behovet for de fleste patienter.

Egenskaber



1522884-XPO150
Bæretaske.



1522884-XPO112
Eksternt batteri.



1522884-XPO132 - Oplader
1522884-XPO140 - Oplader bil



Tilbehør
1522884-XPO120 -
Transportvogn

Egenskaber



XPO₂ & Perfecto₂

Den komplette løsning for stationær og mobil iltforsyning.



Ydelse

Den effektive spareventil sikrer patienten oxygen efter behov.



Bærbar

Med sine kun 2,9 kg, sikrer Invacare XPO₂ en nem håndtering.



Lille, let og kompakt

Det lille og diskrete design inspirerer til øget aktivitet og uafhængighed.



Klinisk effektiv

Giver oxygen direkte og først i vejrtrækningen for at sikre et mere effektivt oxygenudbytte.



Nem betjening

Let og overskuelig betjening.




Filter og timetæller

Placeret let tilgængeligt for nem service.



Forøget uafhængighed

Med det eksterne batteri forøges drifttiden til 7 timer.

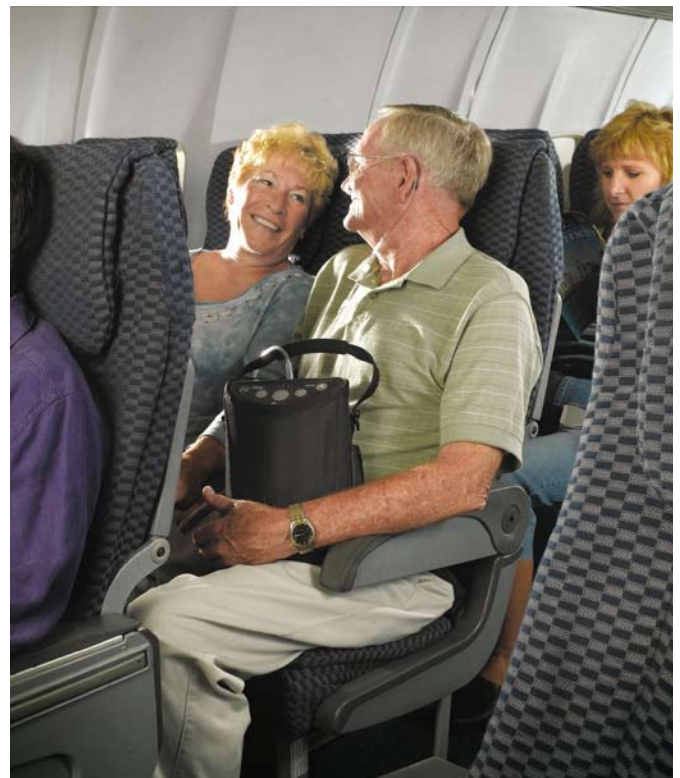






FAA godkendt

Godkendt til brug i fly.

Tekniske data

							
XPO₂	254 mm	178 mm	102 mm	2.9 kg koncentrator, 0.7 kg ekstra batteri	100-240 VAC 50/60 Hz	12-16 VDC	FAA godkendt

					
XPO₂	Pulserende, indstilling 1-5, 900 ml/minut	87% - 96%	IXP1 – beskyttet mod vanddryp	60 W	≤ 45 dB(A) indstilling 2

Sensi-Pulse™

Sensi-Pulse ilttilførsel:

Sensi-Pulse teknologien tilfører ilt ved at efterligne det naturlige åndedræt. Det betyder at uanset åndedrættets frekvens, så bliver den samme mængde ilt leveret. Når frekvensen falder, stiger bolus. Patient-påvirkninger er på helt ned til under 0,20 cm H₂O for at aktivere pulseringen. En stor mængde ilt leveres derefter tidligt i åndedrættet, hvilket giver maksimal komfort og effektivitet.

Indstilling	1	2	3	4	5
Gennemsnitlig mængde ved 20 bpm	15 ml	23 ml	31 ml	37 ml	42 ml
Gennemsnitlig mængde ved 30 bpm	10 ml	15 ml	21 ml	25 ml	28 ml
Internt batteri drifttid (timer)	3.5	2.5	2	1.5	1
Eksternt batteri drifttid (timer)	7	5	4	3	2

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2012 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

XPO - DK - 01/2012



Yes, you can.®